

Brugermanual



Easy Rider 3



Easy Rider Compact (+)



Easy Rider Compact Small

Indholdsfortegnelse

Producentens kontaktoplysninger	2
Overensstemmelse Europa (CE)	3
Overensstemmelse UK (UKCA)	3
Indledning	3
Levering	4
Tilsluttet anvendelse	4
Sikkerhedsforanstaltninger	6
Justering af den trehjulede cykel	10
Før brug	19
Silent elektrosystem	26
Silent elektrisk system muligheder	36
vanRaam e-cykel app	38
Tilvalg	39
Tekniske specifikationer	50
Rengøring og vedligeholdelse af ejeren	51
Reparation og vedligeholdelse af forhandler	52
Returpunkt for bortskaffelse	57
Overdragelse / salg til en ny ejer	57
Garanti	58
Stelnummer	59
Vedligeholdelses anbefaling	60
Serviceplan	62
Leverings- og serviceformular	66

Producentens kontaktoplysninger

vanRaam Mobility B.V.
Guldenweg 23
7051 HT Varsseveld, Holland

☎ +31 (0)315 – 25 73 70

✉ info@vanraam.com

🌐 www.vanraam.com



Overensstemmelse Europa (CE)

vanRaam Mobility B.V., as manufacturer, declares that the Easy Rider, Easy Rider Compact and Easy Rider Compact Small, som beskrevet i denne brugermanual, er fremstillet i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/745, risikoklasse 1. Easy Rider, Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small leveret med Silent Elektrosystemet overholder også direktiv 2006/42/EF inkl. de relevante dele af EMC-direktiv 2014/30/EU og NEN-EN 15194:2017 Cykler - Elektrisk støttede cykler - EPAC-cykler - del 4.2 Elektriske krav. Den underskrevne overensstemmelseserklæring kan findes på vanRaams website.

Overensstemmelse UK (UKCA)

vanRaam Mobility B.V. erklærer som producent, at Easy Rider, Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small, som beskrevet i denne brugermanual, er fremstillet i overensstemmelse med "Essential Requirements of Medical Devices Regulation 2002" (UK MDR 2002 Class 1 Medical Devices). Easy Rider, Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small leveret med det Silent Elektrosystemet overholder også "Machinery (Safety) Directive SI 2008/1597" inkl. de relevante dele af "Electro Magnetic Compatibility Regulations SI 2016/1091" og NEN-EN 15194:2017 Cykler – Elektrisk støttede cykler – EPAC-cykler – del 4.2 Elektriske krav. Easy Rider, Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small er forsynet med UKCA-mærke i henhold til "EU Exit Regulations 2020/1478". Den underskrevne overensstemmelseserklæring kan findes på vanRaams website.

Indledning

Denne brugermanual indeholder vigtig og nødvendig information om brugen af Easy Rider, Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small. I dette dokument refererer "Easy Rider" til Easy Rider 3, både Medium- og Large-varianten, medmindre andet er angivet.



LÆS OMHYGGE

Vi anmoder dig om at læse denne manual grundigt, inden du bruger cyklen. Følg altid de anvisninger, der er angivet i denne brugermanual, og opbevar manualen omhyggeligt. Den nyeste version af brugermanualen kan findes på produktsiden for cyklen på websitet www.vanraam.com.

For børn og personer med begrænset mental opfattelsesevne skal alle sikkerheds- og håndteringsaspekter i denne manual gøres forståelige af en ansvarlig tilsynsperson.

Levering

Leveringen skal indeholde følgende:

- Cykel med eventuel emballage
- Brugermanual(er)
- Eventuelle ladere (afhængigt af tilvalg)
- Reservenøgler

Kontroller leveringen straks ved modtagelsen. I tilfælde af beskadigelse eller ufuldstændig levering beder vi dig kontakte din forhandler øjeblikkeligt. Udfyld ved levering "leverings- og serviceformularen" på bagsiden af denne brugermanual sammen med din forhandler.

Indikation

Børn eller voksne, der ikke kan bruge cykler eller køretøjer på grund af deres handicap, kan muligvis køre på disse trehjulede cykler. Trehjulede cykler kan bruges af børn eller voksne med en neuromuskulær sygdom (f.eks. medfødt hjerneskade, erhvervet hjerneskade eller muskeldystrofi). Dette gælder også ved problemer med f.eks. koordination, balanceforstyrrelser og begrænsede naturlige bevægelsesmuligheder. Supervision kan om nødvendigt være ønskelig.

Tilsigtet anvendelse

Trehjulede cykler er designet til normal brug på et fladt, solidt underlag. De sædvanlige forholdsregler for cykler skal altid overholdes. Sikkerhedsanvisningerne som beskrevet i denne manual skal også følges nøje. Desuden skal de lokale regler for trafikdeltagelse altid overholdes.

Cyklen er beregnet til én person. Brugeren skal være selvstændigt mobil og må ikke have alvorlige synsproblemer eller andre begrænsninger, der gør det umuligt at deltage i trafikken på ansvarlig vis. Den maksimale brugervægt og bagagevægt (kan findes under kapitlet **'Tekniske specifikationer'**) må ikke overskrides.



Enhver anden brug, herunder skader eller kvæstelser som følge heraf, er ikke producentens ansvar.



Sikkerhedsforanstaltninger

- Tag omgående handling, hvis en del er løs under brugen af cyklen, hvis der opdages slak, eller hvis du hører en mærkelig lyd. Kontakt din vanRaam-forhandler, hvis du ikke selv kan løse problemet. Vær særlig opmærksom på hjulene, styret og sædet.
- Brug kun cyklen på et **fast og jævnt underlag**.
- Det anbefales ikke at cykle på en skråning, der er stejlere end 10%; dette indebærer en øget risiko.
- Det anbefales at **køre langsomt på skråninger**.
- Hvis du er stoppet på en skråning, køр langsomt væk og læn dig om nødvendigt fremad for at forhindre, at forhjulet mister kontakt med vejoverfladen.
- Ruller du baglæns på en skråning? Bremse i doser for at forhindre, at forhjulet mister kontakt med vejoverfladen.
- Følgende tilbehør kan påvirke stabiliteten på en skråning negativt: rollatorholder, krykkeholder, kørestolsholder eller en fyldt indkøbskurv.
- Sørg for, at der ikke udvikles farlig fart ved nedkørsler. Bremse i tide og køр i moderat hastighed.
- Vær forsigtig med, at buksebeen eller løstsiddende tøj ikke sidder fast i kæden, hjulene, pedalerne og andre roterende/bevægelige dele.
- Brug ikke en højtryks- eller dampvasker til rengøring.
- Brug parkeringsbremsen, når du parkerer (og forlader) cyklen. Brug også parkeringsbremsen til at forhindre cyklen i at trille væk, når du stiger på og af. Se kapitlet "**Før brug**" for korrekt brug af parkeringsbremsen.
- Lås altid den trehjulede cykel, hvis du forlader cyklen uden opsyn.
- Under graviditet kræves der særlig forsigtighed på grund af en øget risiko for skader.
- Placer ikke cyklen i direkte sollys: Temperaturen på nogle dele kan overstige 41°C. Kontakt med huden kan forårsage hudirritation.
- Forsigtig: Bremseskiver kan blive varme under bremsning. Rør ikke ved bremseskiverne kort tid efter cykling.
- Hvis der er el-assistance til rådighed på cyklen: Øv dig med starthjælpen og baglænskørselsfunktionen. Sørg for, at starthjælpen eller baglænskørselsfunktionen ikke aktiveres utilsigtet under brug af cyklen. Hvis f.eks. pedalerne drejes baglæns, mens du holder ved et lyskryds, aktiveres



baglænskørselsfunktionen, og cyklen begynder at bakke. Øv dig med baglæns- og fremadkørselsfunktionerne. For yderligere information, læs omhyggeligt kapitlet "**Silent Elektrosystemet**".

- Hvis der er leveret en lader med cyklen, skal du også læse informationen under overskriften "Sikkerhedsforanstaltninger for lader" i kapitlet "**Silent Elektrosystemet**".



Høj fart ved sving og på ujævnt terræn, eller for skarpe sving, kan få den trehjulede cykel til at **vælte til siden**.



Ekstra opmærksomhed kræves, hvis et barn eller en voksen med begrænset mental opfattelsesevne bruger cyklen.

Inden barnet eller den voksne med begrænset mental opfattelsesevne begynder at cykle selvstændigt for første gang, skal de først øve sig på cyklen under opsyn.

Vær særlig opmærksom på styreegenskaberne, da dette kan være en stor fare. Forklar også, at den bredeste del af cyklen er bag rytteren. Lad rytteren øve sig i at passere forhindringer for at få en fornemmelse af cykelens bredde.

Børn eller voksne med begrænset mental opfattelsesevne skal **altid** gøres opmærksomme på de mulige farer ved brug af den trehjulede cykel.

- **Aldrig** lad et barn være alene med cyklen uden opsyn!
- Børn skal **altid** bære cykelhjem! Sørg for, at hjelmen sidder korrekt.
- Sørg for, at barnet bærer iøjnefaldende, reflekterende tøj.
- Det anbefales at montere et flag på cyklen, der stikker op over barnet.

Tips til sikker kørsel

Sørg for, at du har justeret cyklen korrekt til rytternes mål, så du kan bruge cyklen sikkert og komfortabelt.



At køre på en trehjulet cykel er en helt anden oplevelse sammenlignet med at køre på en tohjulet cykel.

Vigtige sikkerhedspunkter for rytteren

- Kør meget forsigtigt på den første tur.
- Øv dig især i at svinge og bremse, fordi en trehjulet cykel kan reagere modsat, hvad du ville forvente.
- Hold hænderne på styret og fødderne på pedalerne under kørslen.
- Test cyklens køreegenskaber ved en passende hastighed på et ujævnt underlag. På denne måde lærer du bedre at reagere på uventede bevægelser af cyklen og styret under brug.
- Undersøg, hvordan den trehjulede cykels vippebevægelse reagerer på kropsholdning. Læn dig ind mod kurven. Tag sving ved en passende hastighed.
- Små forhindringer skal køres over ved en passende hastighed.
- Forhindringer, der er højere end fem centimeter, bør undgås.
- Kør altid vinkelret og ved lav hastighed ned fra kantsten eller fartbump.
- En af bremsegrebene betjener bremsen på forhjulet. Der kræves ekstra forsigtighed her, fordi forhjulet kan låse, hvis bremserne trækkes for hårdt. Øv dig i trinvis bremsning.
- Sørg for, at bremsegrebene er nemme at betjene. Disse kan justeres til den rette afstand.

Tjek før hver tur

Kontakt din forhandler, og brug ikke cyklen, hvis du bemærker uregelmæssigheder under kontrollen!

- Tjek at bremserne fungerer korrekt. Bremserne bør virke, og du bør mærke tryk på bremsegrebet.
- Sørg for, at der er nok luft i dækkene. Dækkene må pumpes op til det maksimale tryk, der er angivet på siden af dækket. Tip til ekstra komfort: Du behøver ikke pumpe forhjulet til det maksimale tryk, men sørg for altid at holde dig over det specificerede minimumstryk.
- Tjek at lygterne fungerer korrekt. Se kapitlet '**Før brug**' for den korrekte indstilling af belysningen.
- Tjek at sædet og styret sidder fast. Se kapitlet '**Justering af den trehjulede cykel**' for den korrekte justering af sædet og styret.
- Sørg for, at batteriet er tilstrækkeligt opladet (tilvalg).



Som alle mekaniske dele er cyklen udsat for slitage og høje belastninger. Hvis en komponent svigter, kan det føre til meget farlige situationer og til skader på cykelbrugeren. Eventuelle revner, ridser eller farveforandringer i stærkt belastede dele af en komponent er et tegn på, at delen skal udskiftes.

Belastning

Den maksimalt tilladte belastning må ikke overskrides. Se informationen i tabellen med tekniske data under kapitlet "**Tekniske specifikationer**" i brugermanualen.

Bemærk, at en kurv fuld af bagage kan påvirke køreegenskaberne betydeligt (især på skråninger). Der må ikke bæres bagage på eller hænges fra styret, der begrænser cykling.

Beskadigede eller slidte dele

Udskiftning og reparation af dele (stel, forgaffel, belysning, bremses, drev og styr) skal **altid** udføres af en forhandler. Ellers bortfalder garantien, og brugeren er ansvarlig for eventuelle skader.



Sikkerhedsrelaterede dele skal **altid** erstattes af nye dele!



Hvis der er tvivl om funktionen eller tilstanden af komponenter på cyklen, f.eks. på grund af synlig beskadigelse, slak eller mærkelige lyde, bør en autoriseret vanRaam-forhandler altid konsulteres.

Justering af den trehjulede cykel

Inden du begynder at bruge cyklen, skal du indstille den til rytterens mål. Dette er afgørende, især for sædet og styret.



Hvis en optimal indstilling ikke er mulig med de beskrevne anvisninger, kan du kontakte din forhandler for en passende løsning.

Bremserne er korrekt justeret som standard og bør kun kontrolleres og justeres af forhandleren under regelmæssig vedligeholdelse.




Sørg for, at fingre og andre lemmer ikke sidder fast ved justering af den trehjulede cykel.

Easy Rider

Siddestilling


En tommelfingerregel til justering af siddestillingen er følgende. Rytteren sidder på cyklen og sætter den ene fod på pedalen i den fjerneste position fra rytteren. Juster siddestillingen, så benet i den situation er strakt, men stadig afslappet. Du bestemmer selv den mest komfortable position i praksis.

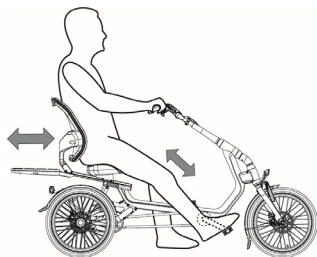

Justering af sædet

Sådan justerer du sædet:

1. Åbn hurtigspændingsgrebets spænde.
2. Skyd sædet til den korrekte position.
3. Luk hurtigspændingsgrebets spænde.

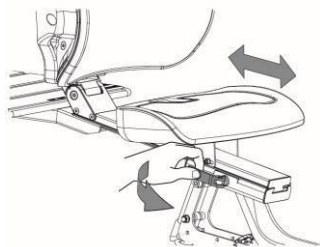

Bemærk! Bagagebakken glider med sædet.

Vær opmærksom på cyklens vælteadfærd, når platformen er fuldt lastet i den yderste position.



Cyklen leveres med den korrekte spænding på grebet. Klemgrebets spænde behøver derfor ikke løsnes eller strammes.




Hvis hurtigspændingsgrebet ikke længere klemmer sædet korrekt, skal hurtigspændingsgrebets bolt [A] justeres til den korrekte spænding.

Dette gøres ved at holde hurtigspændingsgrebet i lukket position og stramme bolt [A] på den anden side med et momentnøgle (maks. 10 Nm). Tjek derefter funktionen.

Hurtigspændingsgrebet skal betjenes manuelt, og sædet må ikke glide, når det er lukket. Hvis sædet ikke længere glider med et åbent hurtigspændingsgreb, er bolt [A] sandsynligvis strammet for meget.


Konsulter din forhandler, hvis du ikke har de rigtige værktøjer eller den nødvendige viden.

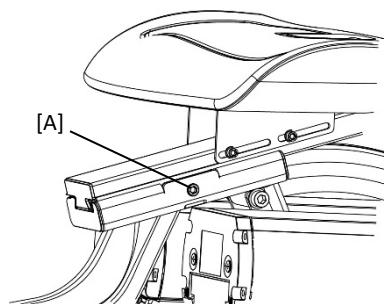

Ryglænets position

Ryglænet kan justeres til den ønskede position.

1. Løsn sekskantbolten [A] et par omgange med en unbrakonøgle.
2. Juster ryglænet til den ønskede position.
3. Stram sekskantbolten [A] igen.

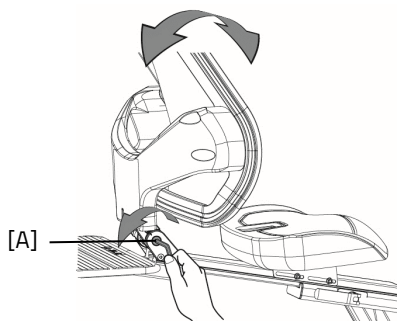


Easy Rider Compact

Justering af sædet

Sædet er trinløst justerbart over et diagonalt område på 150 mm. Sådan justerer du sædet:

1. Åbn de to hurtigspændingsgrebs spænder [A].
2. Skyd sædet til den korrekte position.
3. Luk de to hurtigspændingsgrebs spænder [A].

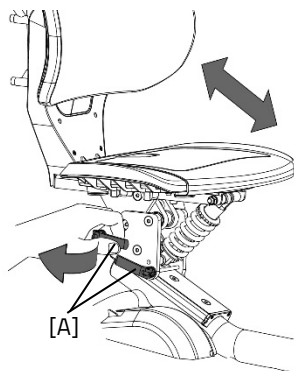


Forsigtig! Sørg for, at begge hurtigspændingsgrebs spænder altid er fast fastspændt.

Forsigtig! Sørg for, at hurtigspændingsgrebets spænder har den korrekte spænding for at sikre, at de er korrekt fastspændt.

Justering af sædets position

Det er vigtigt, at sædet er spændt fast til stellet. For at sikre, at hurtigspændingsgrebets spænder er fastspændt med den korrekte kraft, følg disse trin:





1. Åbn hurtigspændingsgrebet [A].
2. Drej boltene [B] på hurtigspændingsgrebet håndtæt.
3. Luk hurtigspændingsgrebet [C].
4. Gentag ovenstående trin for det andet hurtigspændingsgreb [D].

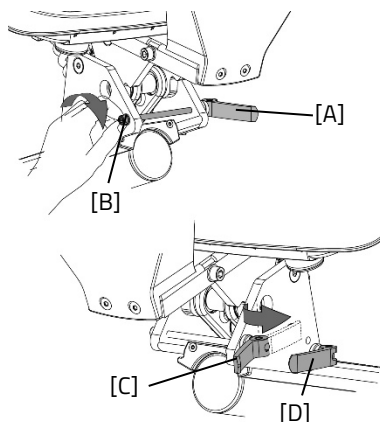

Justering af sædedybde

Sædefladen kan justeres for at tilpasse sædet til brugerens komfort. For at justere sædet, følg disse trin:

1. Fjern sædehynden [A] fra sæderammen.
2. Nu da sædehynden er fjernet, kan sæderammen justeres i forhold til ryglænet.
3. For at gøre dette løsnes de 4 indvendige sekskantskruer [B] et par omgange.
4. Skyd sæderammen frem eller tilbage.
5. Stram de 4 indvendige sekskantskruer [B].
6. Placer sædehynden ved først at skubbe forkanten over sæderammen. Tryk derefter de 4 snapkapper ind i hullerne.

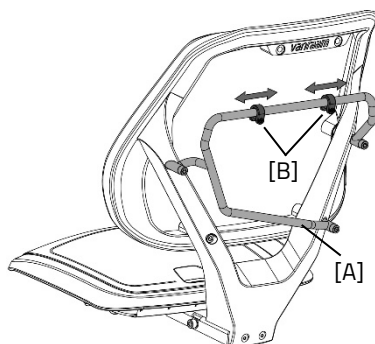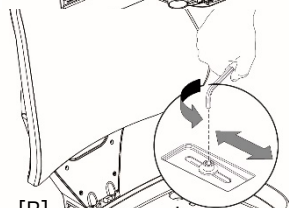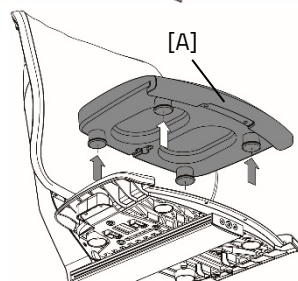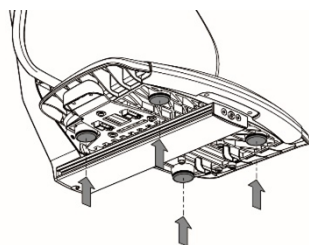

Bæreramme

A En bæreramme [A] er som standard monteret på ryglænet af Easy Rider Compact-sædet. Dette er en universel bæreramme, hvorpå ensidede tasker kan monteres (rammrørdiameter er 12 mm).

Rørklemmerne [B] forhindrer tasken i at glide af rammen. Disse klemmer kan repositioneres til en specifik taske. Klemmerne kan repositioneres ved hjælp af en unbrakonøgle til at løsne bolten.


Forsigtig! Bærepladerne glider med sædet. Pas på trehjuls cyklens tendens til at vippe, når bærepladerne er fuldt lastet i den udstrakte position.

Easy Rider Compact +

Justering af sædet

Sædet er trinløst justerbart over et område på 120 mm. Sådan justerer du sædet:

1. Løsn hurtigspændingsgrebet [A].
2. Skyd sædet til den korrekte position.
3. Stram hurtigspændingsgrebet [A].

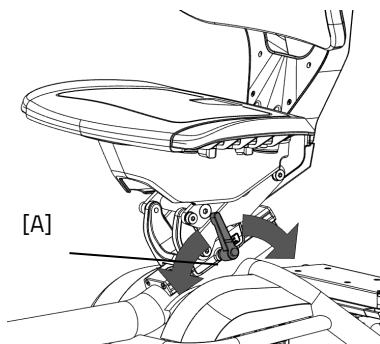

Forsigtig! Sørg altid for, at hurtigspændingsgrebet har tilstrækkelig klemmekraft på rammen.

Forsigtig! Sørg for, at hurtigspændingsgrebet har den korrekte spænding for at garantere fastspænding.


Forsigtig! Stram ikke hurtigspændingsgrebet mere end 8 Nm.

Easy Rider Compact Small

Justering af sædet

Sådan justerer du sædet:

1. Åbn de to hurtigspændingsgrebs spænder [A].
2. Skyd sædet til den ønskede position.
3. Luk de to hurtigspændingsgrebs spænder [A].

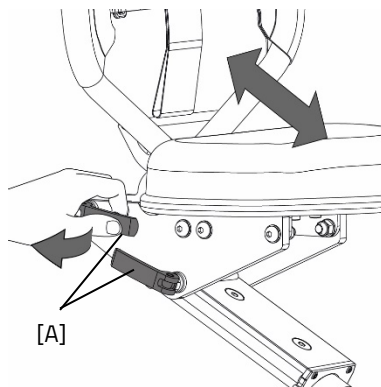


Bemærk! Sørg altid for, at begge hurtigspændingsgrebs spænder er tilstrækkeligt fastspændt.

Bemærk! Sørg for, at hurtigspændingsgrebets spænder har den korrekte spænding for at sikre fastspænding.

Ryglænets position

Ryglænet kan justeres til den ønskede position. Sådan gør du:


1. Løsn møtrikken [A] et par omgange med en nøgle.
2. Flyt ryglænet til den ønskede position.
3. Stram møtrikken [A] igen.

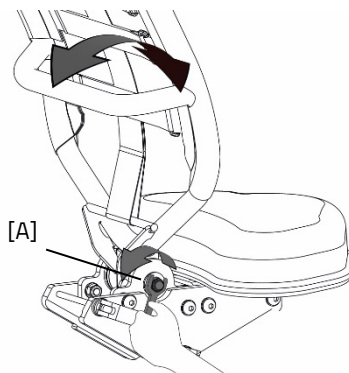

Ryglænets tilpasning

Sådan justerer du ryglænets spænding:

1. Åbn stropperne ved at løsne velcro-lukningen.
2. Stram eller løsne stropperne.
3. Genmonter velcro-lukningen.

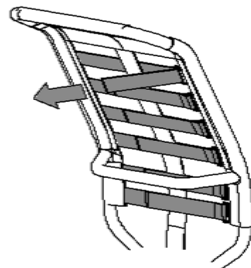

Styrets position

(Easy Rider, Easy Rider Compact)



Du kan vippe styret. Dette påvirker afstanden fra styret til overkroppen. Du bestemmer selv den mest komfortable position i praksis.

Sådan vipper du styret:

1. Tryk og hold knappen [A] på siden af styrstammen nede for at frigøre grebet.
2. Åbn toppen [B] af styrstammen ved at løfte grebet.
3. Placer styret i den ønskede position og luk toppen af styrstammen.



Cyklen leveres med den korrekte spænding på grebet. Hvis klammen ikke lukker korrekt, og styret ikke er korrekt sikret, skal styrstammen genjusteres. Se kapitlet "Reparation og vedligeholdelse af forhandler" for yderligere information.

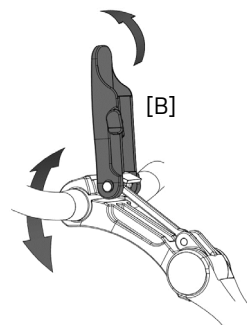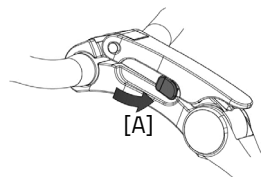


Styrhøjde (Easy Rider and Easy Rider Compact)

Styrets højde påvirker kørekomforten. Dette bestemmer trykket på hænderne og ryggens holdning. Du bestemmer selv den mest komfortable position i praksis.

Sådan justerer du styrets højde:

1. Vip styret til den laveste position som vist på billedet. (Læs styrets position for information om vipning af styrstammen)
2. Sekskantbolten kan nås ved at vippe styret nedad.
3. Løsn bolten [A] et par omgange med en unbrakonøgle.
4. Løsn derefter parkeringsbremsens klemmebolte et par omgange [B].
5. Skyd styrstammen til den korrekte højde og stram derefter skruen igen.
6. Stram endelig parkeringsbremsens klemmebolte [B] igen. Sørg for, at parkeringsbremsens klemme altid er forbundet med styrrøret [C].

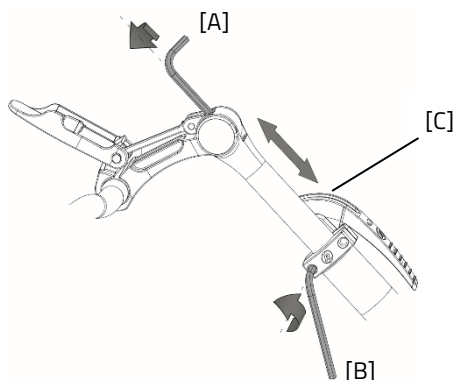


Træk ikke styrstammen ud længere end markeringen, ellers vil røret ikke trænge dybt nok ned i akslen, og der er risiko for brud, som kan medføre alvorlige kvæstelser.



Styrets position (Easy Rider Compact Small)

Du kan vippe styret. Dette påvirker afstanden fra styret til overkroppen. Du bestemmer selv den mest komfortable position i praksis. Sådan vipper du styret:


1. Løsn bolten [A] et par omgange med en unbrakonøgle.
2. Flyt styret til den ønskede position og stram derefter skruen igen.
3. Løsn skruen [B] et par omgange med en unbrakonøgle, bring styret tilbage til den korrekte (flade) position og stram derefter skruen igen.

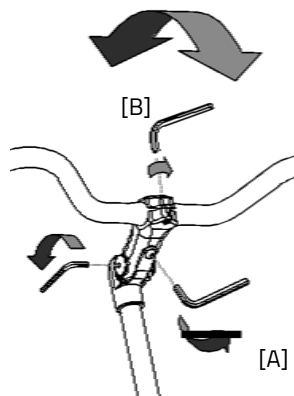

Styrhøjde (Easy Rider Compact Small)

Styrets højde påvirker kørekomforten. Dette bestemmer trykket på hænderne og ryggens holdning. Du bestemmer selv den mest komfortable position i praksis. Sådan justerer du styret:

1. Løsn skruen et par omgange med en unbrakonøgle.
2. Skyd styrstammen til den korrekte højde og stram derefter skruen fast igen.

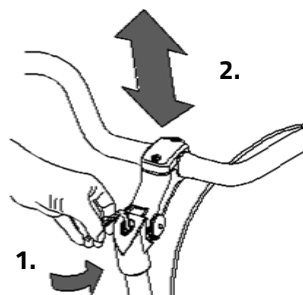

Træk ikke styrstammen ud **længere** end markeringen. Ellers vil røret ikke trænge dybt nok ned i akslen, og der er risiko for brud, som kan medføre alvorlige kvæstelser.




Før brug

Parkeringsbremse

(Easy Rider, Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)



Brug altid parkeringsbremsen, når du parkerer (og forlader) cyklen. Billedet viser parkeringsbremsen i parkeringsposition.

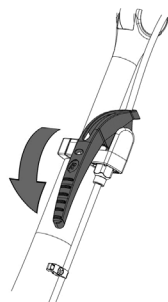

Prøv altid at parkere cyklen på et jævnt underlag. Det anbefales ikke at parkere cyklen på en skråning, der er stejlere end 6%.

Bremsegreb med parkeringsbremsefunktion

Din cykel kan være udstyret med et af de to bremsegreb med integreret parkeringsbremsefunktion. Vi anbefaler dig altid at bruge det øverste parkeringsbremsegreb. Skulle du dog ønske at bruge begge parkeringsfunktioner, fungerer det som følger.

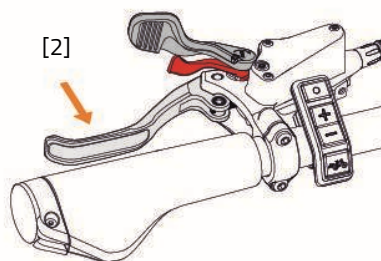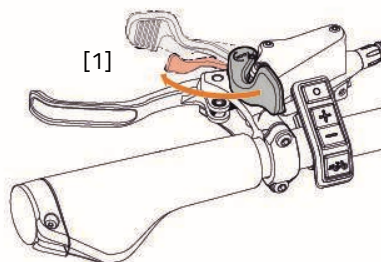

Aktivering af Tektro parkeringsbremsen

1. Skub først parkeringsgrebet fremad.
2. Tryk derefter kraftigt på bremsegrebet, indtil du hører et par klik. Dette indikerer, at bremsen er aktiv.




Forsigtig! Tryk altid kraftigt på bremsegrebet for at sikre, at parkeringsbremsen aktiveres korrekt.



Forsigtig! Kontroller altid, at parkeringsbremsen er korrekt aktiveret, inden du forlader cyklen.


Deaktiver Tektro parkeringsbremsen

1. Skub den røde greb fremad.
2. Træk derefter begge grebs mod dig.

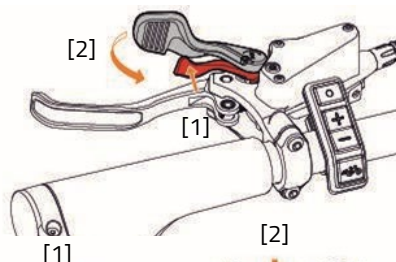

Aktiver Alhonga parkeringsbremsen


1. Tryk kraftigt på bremsgrebet (1) og tryk derefter på parkeringsbremsens knap (2).
2. Parkeringsbremsen er korrekt aktiveret, når knappen er trykket ind. Du vil høre et klik, hvilket indikerer, at bremsen er aktiv.

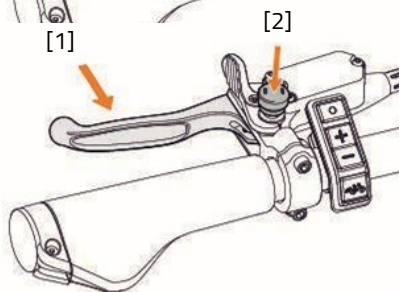

Forsigtig! Kontroller altid, at parkeringsbremsen er korrekt aktiveret, inden du forlader cyklen.

Deaktiver Alhonga parkeringsbremse

1. Tryk let på bremsgrebet (1).
2. Skub derefter grebet til siden (2) for at frigøre parkeringsbremsen..

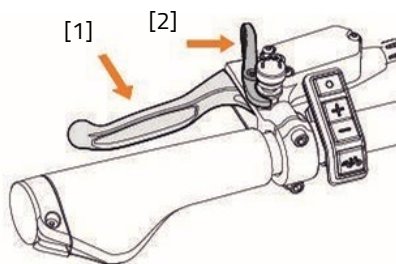

Indkøringsprocedure for skivebremser

Alle nye skivebremseklodser og skiver skal indkøres inden den første tur. Denne indkøring sikrer kraftigere, mere lydløse og mere konsistente bremsere. Under denne proces varmes bremsene og skiverne op, og der påføres et jævnt lag bremsemateriale på skiven. Dette lag forbedrer bremseydelsen betydeligt.



Du skal bremse kraftigt under indkøringsprocessen. Sørg for, at du er fortrolig med betjeningen og styrken af skivebremser. Uerfaren brug kan føre til fald, der resulterer i alvorlige kvæstelser eller værre. Lad din forhandler udføre indkøringen, hvis du ikke selv er fortrolig med den.

Bliv siddende i sadlen under hele indkøringsprocessen og sørg for, at hjulene ikke låser, så du sikkert opnår det bedste resultat.

1. Accelerer cyklen til en gennemsnitlig hastighed på et fladt, sikkert og forhindringsfrit underlag.
2. Brug bremsgrebet, indtil din cykelhastighed er faldet til ganghastighed. Brug kun ét bremsegreb ad gangen. Vær forsigtig under denne procedure. Brug bremsgrebet moderat, især ved indkøring af frontbremsen.
3. Gentag trin 1 og 2 mindst 20 gange for både for- og bagbremser. Gentag denne procedure oftere for at øge bremsekræften.

Belysning

Normalt kan belysningen på cyklen betjenes manuelt og justeres til forskellige positioner. Når cyklen er udstyret med Silent Elektrosystemet, tænder belysningen automatisk, når elsystemet aktiveres. Nedenfor forklares betjeningen af både den manuelt betjente belysning og den centralt betjente belysning.

Manuelt betjent forlygter


(Easy Rider, Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)

Forlygtens trykknop har tre positioner: TIL – TIL [50%] – FRA.

Juster forlygtens vinkel, så midten af lysstrålen er ca. ti meter foran cyklen.

Forlygten kører på batterier. Når batterierne er ved at løbe tør, tænder en rød LED-knap ved forlygtens trykknapper. Følg trinnene nedenfor for at udskifte batterierne.

1. Åbn lampen ved at trykke ned på kanten af huset og trække lampens forside af.
2. Udskift de to alkalibatterier (2x AA).
3. Saml lampen igen ved først at trykke toppen ind i huset og derefter klikke bunden på plads bag kanten.

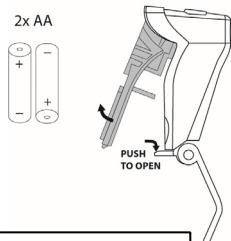

Betjen kun belysningen, når du er stationær, for at undgå farlige situationer og risikoen for kvæstelser.

Manuelt betjent baglygte (Easy Rider)

Baglygten har en tænd/sluk-knap, hvor **Off-Auto-On** kan indstilles.

Indstillingen er som følger:

Tryk **1x** belysning er tændt

Tryk **2x** belysning er automatisk

Tryk **3x** belysning er slukket

I "On/Off" positionen kan baglygten slukkes eller tændes manuelt.



I "Auto"-tilstand tænder og slukker baglygten automatisk ved hjælp af lys- og bevægelsessensorer. Hvis der ikke registreres bevægelse efter nogen tid, slukkes belysningen automatisk.

Forlygten kører på batterier. Når batterierne næsten er tomme, vil en rød LED på toppen af baglygten blinke. Følg trinnene nedenfor for at udskifte batterierne.

1. Fjern dækslet fra huset ved at trykke på kanten i bunden.
2. Udskift alkalibatterierne (1,5 V – 1500 mA) og sæt dækslet på.



Batterier forurener miljøet. Følg de lokale regler ved bortskaffelse.

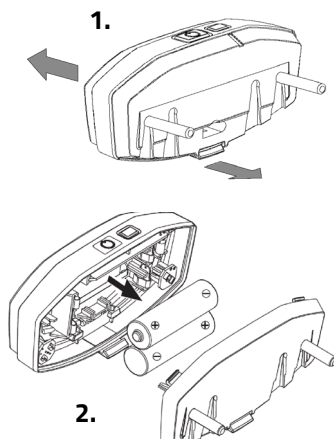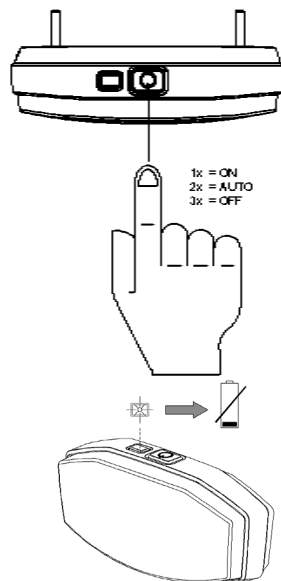

Manuelt betjent baglygte


(Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)

Baglygten kan tændes ved at bruge TIL/FRA-knappen nedenunder.

Baglygten kører på batterier. Når batteriet er næsten tomt, tænder en rød LED [B]. Følg trinnene nedenfor for at udskifte batterierne.

1. Brug en flad genstand [C], f.eks. en mønt, til at løsne lampens forside.
2. Fjern det forreste dæksel [D] fra huset.
3. Udskift batteriet [E] på bagsiden af printkortet [F].

Batteritype: CR2032

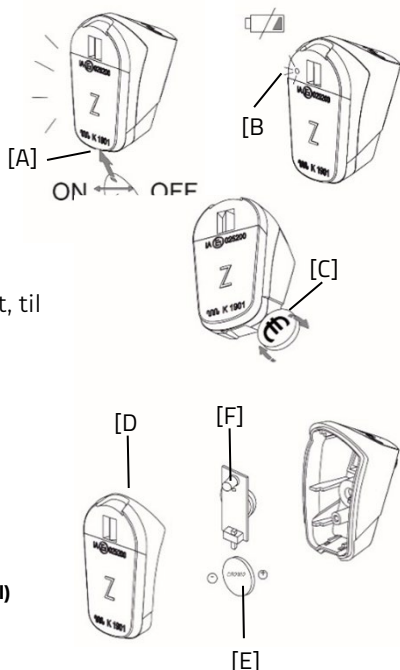

Centralt betjent belysning


(Easy Rider, Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)

Cyklen er udstyret med centralt betjent belysning (for og bag) med belysningen tilsluttet elsystemet.

Lyset tænder automatisk, når det elektriske system er aktiveret.

Juster forlygtens vinkel, så midten af lysstrålen er ca. ti meter foran cyklen.

Du kan tænde og slukke belysningen manuelt ved kort at trykke på til/fra-knappen på displayet. Når elsystemet er slukket, slukkes belysningen automatisk.

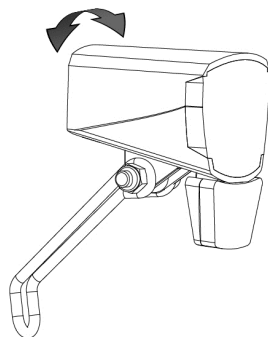

Sørg for, at der altid er et opladet batteri på cyklen, når du cykler i mørket!


Så snart batteriet er næsten tomt, yder motoren ikke længere assistance under cykling. Den betjenbare belysning vil stadig fungere på reststrømmen.

Gear

(Easy Rider, Easy Rider Compact)


Cyklen er valgfrit udstyret med gear. Gearene betjenes ved at dreje grebet.

Shimano Nexus 8 – Dette system har 8 gear, som du kan justere trin for trin.

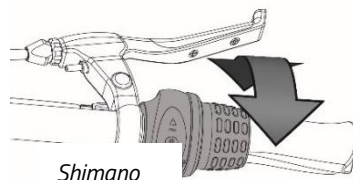

Forsigtig! Skift ikke gear, mens du træder i pedalerne, for at forhindre skade på gearsystemet.

Enviolo – Med dette system kan du skifte gear problemfrit. Du kan justere modstanden jævnt med drejegrebet. Du kan fortsætte med at træde i pedalerne, mens du skifter gear.

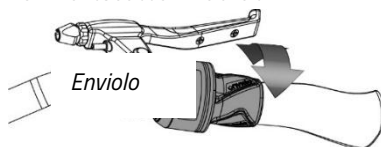

Silent elektrosystem


Silent elsystemet er vanRaams el-assistancesystem og består af 5 komponenter: display, knappenhed, batteri, motor og krankleje. Hvordan de første 3 dele bruges, forklares i denne brugermanual.

Betjening af displayet

Displayet giver dig cyklinginformation, som vil blive forklaret mere detaljeret senere. Displayet er monteret på styret ved hjælp af en beslag. Displayet kan ikke og behøver ikke fjernes, når du forlader cyklen.

- (1) Til/fra
Denne knap tænder elsystemet.
- (2) Cykellygte

Lygterne på cyklen tænder automatisk, når elsystemet tændes. Ved kort at trykke på denne knap kan lygterne slukkes (og tændes).

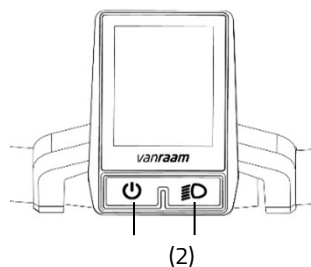


Betjening af knapenheden

Knapenheden er monteret ved siden af styrgrebbet. Du bruger knapenheden til at betjene elsystemet.



Knapenheden kan monteres på den anden side af styret af din forhandler.

- (3) Mode
Ved kort at trykke på denne knap kan du skifte mellem de forskellige skærmtilstande.
- (4) Plus – Forøg el-assistancens effekt
- (5) Minus – Reducer el-assistancens effekt
- (6) Starthjælp

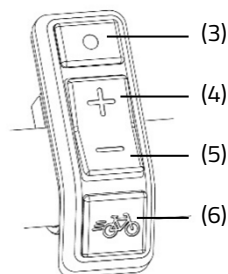


Informationsskærm

Når elsystemet er tændt, vises informationsskærmen. Denne skærm viser realtidscyklingsinformation.



Informationsskærmen vil kun fungere, hvis du har tændt elsystemet.

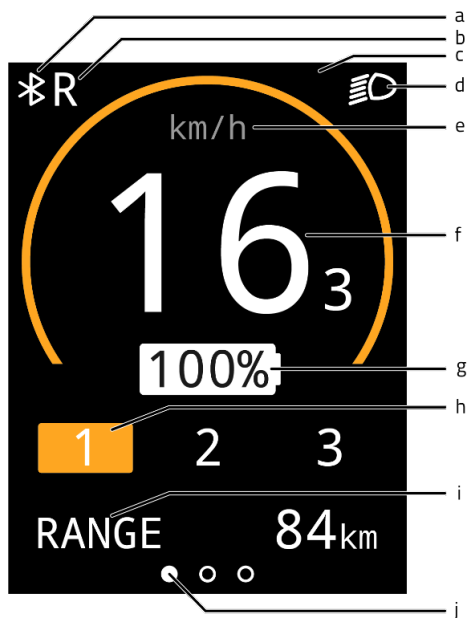

- (a) Bluetooth-forbindelse
- (b) Baglænskørselsfunktion af (tommel)gas aktiveret
- (c) Meddelelsesområde
- (d) Cykellygte
- (e) Hastighedsindikator
- (f) Hastighed
- (g) Batteriets opladningsprocent
- (h) Assistancetilstand
- (i) Skærmtilstande
- (j) Screen mode orientation bar

Skærmtilstande

Skærmtilstanden (i) kan indstilles ved hjælp af tilstandsknappen (3). Du kan skifte mellem følgende 3 skærmtilstande under cykling.

1. Aktionsradius [RÆKKEVIDDE] (standardvisning)
Dette er antallet af kilometer, der stadig kan cykles med den resterende batterikapacitet i den aktive assistancetilstand.



Rækkevidden er afhængig af assistancetilstanden og er et skøn, så den faktiske rækkevidde kan afvige fra skønnet. Rækkevidden påvirkes af faktorer som batterikapacitet, assistanceniveau, dæktryk, kørehastighed, rytterens vægt, belastning og omgivelser.

RANGE 64km
• • •

2. Turens distance [TUR]
Dette er den tilbagelagte afstand siden turens kilometertæller sidst blev nulstillet. Ved at holde tilstandsknappen nede i ét sekund kan turens kilometertæller nulstilles til 0.

TRIP 24.4km
• • •

3. Total distance [TOTAL]
Dette er den samlede distance, som cyklen har tilbagelagt med elsystemet tændt.

TOTAL 1254km
• • •

Indstillingsskærm


På indstillingsskærmen kan displayets lysstyrke og enhederne for afstand og hastighed ændres.

For at få adgang til indstillingsskærmen skal tilstandsknappen (3) og plusknappen (4) trykkes ned samtidigt i ét sekund.

Tilstandsknappen (3) kan bruges til at skifte mellem indstillingerne. Plus- og minusknapperne (4, 5) kan bruges til at ændre indstillingerne.

For at forlade indstillingsskærmen skal du holde tilstandsknappen (3) nede i ét sekund.

SETTINGS

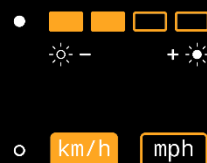

Meddelelser

Adskillige symboler kan vises på informationsskærmen. Symbolerne forklares nedenfor. Yderligere information om meddelelserne kan findes i kapitlet **"Mulige fejl"**.



Cykellygterne er aktiveret



En Bluetooth-forbindelse er aktiv



Ingen kommunikation med batteriet



Baglænskørselsfunktion af (tommel)gas er aktiveret



Controllerens temperatur er for høj



Spændingen er for høj



Fejl

Starthjælp

Med starthjælp aktiveres el-assistance op til en hastighed på 6 km/h, uden at du selv behøver at træde i pedalerne. For at gøre dette skal du trykke og holde starthjælpsknappen (6) nede. Hvis knappen trykkes igen, genaktiveres funktionen.

Hvis du trykker på starthjælpsknappen under cykling, vil du få en "boost". Denne boost vil have den samme maksimale hastighed som cyklen. Den aktiverede el-assistance-tilstand bestemmer graden af assistance for starthjælp og "boost".

Starthjælpsknappen kan bruges til:

- Ekstra assistance ved start (starthjælp).
- Ekstra assistance ved cykling op ad bakke (boost).

Assistanceindstillinger

Niveauet af el-assistance kan indstilles ved hjælp af assistanceindstillinger 1, 2 og 3. Assistanceindstillingerne kan ændres under kørsel.

1. Lavt assistanceniveau, maksimal rækkevidde.



2. Gennemsnitlig assistance, gennemsnitlig rækkevidde.



3. Maksimal assistance, lav rækkevidde.



Baglæns kørsel

Baglænskørselsfunktionen aktiveres ved at træde baglæns fra en stationær position. Efter et par omdrejninger af hjulet aktiveres motoren, og cyklen bakker med en hastighed på 3 km/h, så længe der trædes baglæns.



Lad ikke elmoterens pludselige adfærd overraske dig. F.eks. hvis du sjovt træder baglæns, mens du venter ved lyskrydset, aktiveres baglænskørselsfunktionen, og cyklen begynder at køre baglæns!

Støttetilstande

En støttetilstand er et sæt indstillinger, der angiver niveauet af assistance. Ved at indlæse en anden tilstand kan niveauet af assistance for alle assistancetilstande justeres. Tilstande kan ændres af forhandleren eller via vanRaam-appen.

Drift uden batteri

Hvis batteriet er tomt, eller der ikke er noget batteri på cyklen, kan cyklen stadig køres, og gearene fungerer.

Opladning af batteriet







Følg disse trin for at fjerne og oplade cykelbatteriet:

1. Lås batteriet op ved at dreje nøglen en kvart omgang.
2. Tryk på låseknappen.
3. Skyd batteriet et par centimeter ud af holderen.
4. Du kan nu løfte batteriet af, om nødvendigt med to hænder.
5. Tag batteriet indefra **Først**, Sæt laderens stik i batteriets ladestik.
6. **Derefter** sæt laderen i stikkontakten. En grøn LED på batteriet begynder at blinke, og en rød LED på laderen tænder for at angive, at opladning er i gang.



Forsigtig! Hvis der ikke er korrekt kontakt mellem batteriet og laderen, tænder den grønne LED på laderen (standbytilstand). Dette kan indikere utilstrækkelig forbindelse, så tag laderen ud og rengør stikket med en tør klud.


7. Opladningstiden afhænger af batteriets status. Opladningstiden er ca. 2 timer for et 11,4 Ah/36 V-batteri og ca. 4,5 timer for et 23,5 Ah/36 V-batteri.
8. Når batteriet er fuldt opladet, forbliver den grønne LED tændt kontinuerligt. **Først**, tag laderen ud af stikkontakten.
9. **Derefter** Fjern laderens stik fra batteriet. Sæt batteriet tilbage i holderen på cyklen og lås det. Batteriet kan også oplades direkte i holderen, hvis det ønskes.

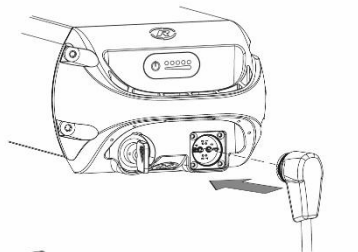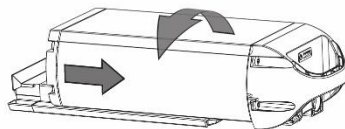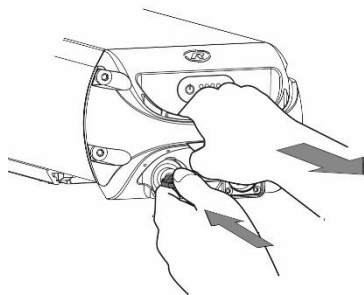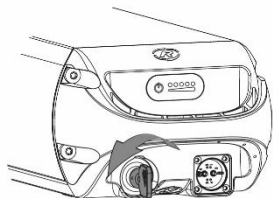

Laderens indikatorlys

Laderens status angives af det farvede indikatorlys.

- Hvis indikatorlyset er grønt, er laderen i standbytilstand, eller batteriet er fuldt.
- Hvis indikatorlyset er rødt, oplader laderen batteriet.
- ⊘ Hvis indikatorlyset blinker rødt, er laderen i fejltilstand.

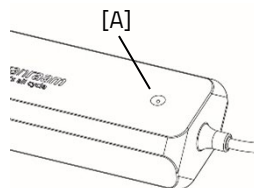

Forsigtig! Tag laderen ud af stikkontakten.



Brug kun laderen, når omgivelsestemperaturen er mellem 0 °C og 35 °C.




Det er bedre for batteriet at oplade det periodisk i stedet for at vente, til det er helt tomt.



Kontroller batteriets opladning månedligt om vinteren og genoplad det, hvis færre end tre LED'er er tændt.

Batteriets indikatorlys

Der er en LED-indikator på batteripakken til kontrol af batteriets opladningsstatus. Batteriets opladningsstatus kan aflæses ved kort at trykke på til/fra-knappen [A]. Mens batteriet oplades, viser indikatoren opladningsforløbet:

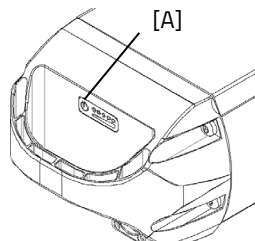

Batteriet er fuldt opladet. Når batteriet bruges, vil antallet af grønne lamper falde.



Hvis to grønne lamper er tændt, er batteriet 50% opladet.



Hvis kun den venstre LED forbliver grøn, er batteriet næsten tomt og skal genoplades eller erstattes med et opladet batteri.



Hvis den venstre LED begynder at blinke grønt, er batteriet tomt og motoren vil ikke understøtte cykling meget længere. Den afbrydelige belysning vil dog stadig fungere herefter.



Stil aldrig cyklen væk med et tomt batteri.

Batteriets dvaletilstand

Når batteriet er næsten tomt og ikke har været brugt i en uge, går batteriet i "dyb dvaletilstand". I denne tilstand bruger batteriet så lidt energi som muligt, hvilket forlænger batteriets levetid.

Når "dyb dvaletilstand" er aktiveret, kan batteriet ikke bruges. Ved at trykke på til/fra-knappen [A] på batteriet frigøres batteriet fra "dyb dvaletilstand" og kan bruges igen. Det anbefales at oplade batteriet, inden det bruges.

Opladning og vedligeholdelse af batteripakken

Vigtig sikkerhedsadvarsel:



Aflad batteriet fuldstændigt under den første brug. Batteriet vil derefter gøre optimal brug af sin kapacitet. Det er ikke nødvendigt at aflade batteriet på én gang; dette kan også spredes over flere ture. Oplad batteriet fuldstændigt efter afladning. Batteriet kan derefter bruges efter behov.

- For at sikre batteriets optimale tilstand og kapacitet anbefaler vi at oplade det indendørs ved stuetemperatur.
- Stil aldrig cyklen væk med et tomt batteri. Vi anbefaler at oplade batteriet hurtigst muligt, når det er tomt. Det bedste opbevaringsopladningsniveau for batteriet er, når opladningsdisplayet viser tre til fem LED-lys.
- Om vinteren skal du kontrollere batteriets opladning hver andet måned og genoplade det, hvis færre end tre LED'er tænder.
- Opbevar og brug helst batteriet mellem 5 °C og 20 °C; undgå højere og lavere temperaturer.
- Oplad ikke batteriet i direkte sollys, og sørg for, at batteriet ikke oplades ved en temperatur lavere end 5 °C.
- Brug kun laderen i tørre indendørsområder; laderen må ikke blive våd.
- Brug kun den medfølgende vanRaam-oplader.
- Batteriets og laderens hus må ikke åbnes. Kontakt din forhandler i tilfælde af problemer.
- Et vanRaam-batteri bør ikke og kan ikke rekonditioneres af sikkerhedsmæssige årsager og korrekt funktion af elsystemet.
- Tab ikke batteriet, da dette kan forårsage eksternt og internt skade.
- Hvis cyklen fejler, skal batteriet frakobles cyklen.



Husk, at cyklen yder mindre assistance ved lavere temperaturer (0°C og derunder), og at batteriet aflades hurtigere. Det tager også længere tid at oplade ved lave temperaturer.



Hvert batteri aflades over tid. Denne proces kaldes "selvafladning". Et batteri, der er tomt og ikke er opladet, kan undergå en dyb afladning forårsaget af selvafladning og blive defekt som følge heraf. Garantien bortfalder i tilfælde af dyb afladning.



Husk, at hvert batteri slides med tiden. Batteriets slitage er uundgåelig og afhænger af adskillige faktorer såsom brug, antallet af gange det er fuldt afladet og opladet, og omgivelsestemperaturen. Selv hvis batteriet ikke bruges, vil kapaciteten falde. Et slidt batteri kan bruges, men husk, at rækkevidden vil blive reduceret.

Mulige fejl

- Systemet kan ikke tændes:
 1. Kontroller, at batteriet er korrekt fastgjort.
 2. Kontroller batteriets status. Oplad batteriet, hvis det er tomt.
 3. Kontakt din forhandler, hvis ovenstående ikke giver en løsning.
- Hvis en rød LED blinker på laderen, skal du tage laderen ud af stikkontakten og stoppe med at bruge laderen og batteriet. Kontakt din forhandler i et sådant tilfælde.

Tabel over fejlmeddelelser på informationsskærmen:

Fejlsymbol/-kode	Beskrivelse	Konsekvens/handlingsforløb
Alle assistancetilstande blinker	Temperaturregulator for høj	Systemet yder assistance; motoreffekten er reduceret.
Termometer (symbol) + alle assistancetilstande blinker.	Temperaturregulator for høj	Systemet yder ikke assistance; lad kontrolløren køle ned.
Batteri med kryds (symbol) + alle assistancetilstande blinker	Ingen kommunikation med batteriet	Systemet yder assistance. Kontakt din forhandler.

Lyn (symbol) + assistanceindstillinger er slukket	Spænding for høj	Systemet yder ikke assistance; spændingen falder automatisk, når cykelhastigheden er langsommere end den maksimale assistancehastighed.
Udråbstegn (symbol)	Spænding for lav	Systemet yder ikke assistance; kontroller forbindelsen mellem controller og batteri. Kontroller, hvor fuldt batteriet er.
	Controllerkommunikationsfejl	Systemet yder ikke assistance. Kontakt din forhandler.
Aktiv assistancetilstand blinker	Elektrisk strøm for høj	Systemet yder ikke assistance. Kontakt din forhandler.
Aktiv assistancetilstand blinker	Motorsensorfejl	Systemet yder assistance. Kontakt din forhandler.
Alle assistancetilstande er slukket.	Batteriet er næsten tomt.	Oplad batteriet.

Opladning og vedligeholdelse af batteripakken

Vigtig sikkerhedsadvarsel:

Sikkerhedsforanstaltninger for lader

- Oplad kun vanRaam-Li-Ion-batterier med den medfølgende lader. Tilslut kun laderen til en egnet stikkontakt (220-240 Volt AC 50-60 Hz). Frakobl laderen fra stikkontakten og strømsvikket fra batteriet, når laderen ikke er i brug.

- Laderen må kun bruges af personer, der har læst informationen i denne manual og er fortrolige med korrekt brug af laderen. Opbevar laderen utilgængeligt for børn; de bør ikke lege med laderen.
- Laderen er designet til brug i et støvfrit, tørt og ventileret miljø. Udsæt ikke batteriet for vand, varmekilder og direkte sollys. Hold laderen ren og tør.
- Oplad ikke batterier, der føles varme. Batteriet må kun oplades på steder, hvor temperaturen ikke er højere end stuetemperatur. Stop opladningen, hvis batteriet bliver unormalt varmt ($> 40\text{ }^{\circ}\text{C}$).
Forsigtig! Laderen kan blive varm under opladning $> 50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Tjek forsigtigt, om du kan tage laderen op; denne temperatur kan forårsage overfølsomhed eller en chokreaktion ved hudkontakt.
- Brug ikke laderen, hvis den er synligt beskadiget eller modificeret. Reparer ikke laderen selv! Kontakt vanRaam. Du er strengt forbudt at åbne laderen selv!
- Hold altid øje med laderen og batteriet under opladning. Frakobl strømstikket fra stikkontakten og fjern strømstikket fra batteriet, når batteriet er fuldt.

Silent elektrisk system muligheder


For hvert cykelmodel er der forskellige muligheder for elsystemet.

Eksternt ladepunkt

(Standard for Easy Rider, optional for Easy Rider Compact and Easy Rider Compact Small)

Easy Rider er udstyret med et eksternt ladepunkt i ryglænet. Dette gør det muligt at oplade batteriet via et let tilgængeligt ladepunkt uden at skulle fjerne batteriet fra cyklen.

Det eksterne ladepunkt er valgfrit for Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small.

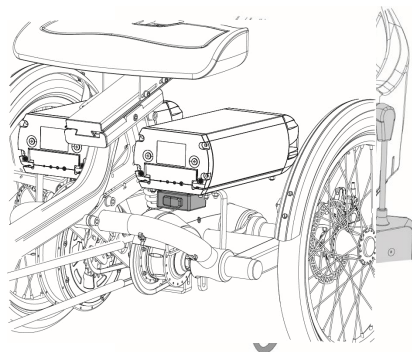


Hvis batteriet ikke lader, skal du kontrollere, om strømstikket til det eksterne ladepunkt er korrekt forbundet til batteriet.

Reservebatteri (tilvalg)

(Easy Rider)

Cyklen kan udstyres med et andet batteri. Byt batterierne, så snart det tilsluttede batteri er tomt.

Én batteriholder er tilsluttet systemet og kan genkendes på kablerne.

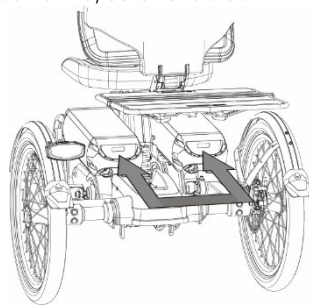

Omskifteligt batteripakke (tilvalg)

(Easy Rider)

Hvis du har to batterier, kan cyklen udstyres med muligheden for omskifteligt batteripakke. Så snart det tilsluttede batteri er tomt, kan du

skifte batterier ved hjælp af en kontakt. Denne er placeret under sædet, holderen eller batteriet.

Begge batteriholdere er tilsluttet systemet. Du kan om ønsket lade det tomme batteri stå uden for holderen i mellemtiden for at oplade batteriet.

Tommelgasgrebet

Cyklen kan udstyres med et tommelgasgreb. Tommelgasgrebet er monteret ved siden af styret og kan betjenes med tommelfingeren. Når gasgrebet betjenes, begynder cyklen at køre op til en maksimal hastighed på 6 km/h uden behov for at træde i pedalerne.


Kontakten på tommelgasgrebet kan bruges til at skifte mellem frem- og baglænskørsel. Når kontakten er indstillet til '0', begynder cyklen at køre fremad, så snart tommelgasgrebet betjenes, og når kontakten er indstillet til '1', kører cyklen baglæns med en maksimal hastighed på 3 km/h.



Når baglænstilstanden er aktiveret, er det ikke muligt at ændre støtteniveauet. For at ændre støtteniveauet skal kontakten først indstilles til position '0'.

Retningsindikator

Cyklen kan udstyres med en retningsindikator. For at betjene retningsindikatorerne skal du trykke på kontakten [A] på styret til venstre eller højre. Når retningsindikatoren er aktiv, kan der høres en kliklyd. For at deaktivere retningsindikatoren skal du indstille knappen til midterposition. Retningsindikatoren drives af batteriet fra Silent Elektrisk System.

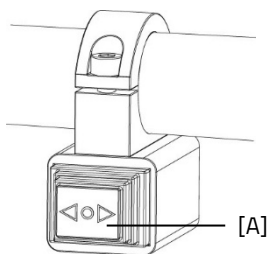

Bemærk, at blinklyset kun kan aktiveres, når cykelens belysning er tændt.

vanRaam e-cykel app

vanRaam-appen er en gratis smartphone-app, som du kan bruge under cykling på din elektriske vanRaam-cykel.

vanRaam-appen kan downloades gratis fra **Google Play Store** eller **Apple App Store**.

Apple app store:



Google Play Store:



For yderligere information om vanRaam-appen kan du besøge vanRaams website: www.vanraam.com.

Tilvalg

Fjernelse af sædet til transport

(Easy Rider, Easy Rider Compact en Easy Rider Compact Small)

Med Easy Rider, Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small er det muligt at afmontere sædet. Dette gør det lettere at transportere cyklen på en cykelholder. Forsigtig! Det er vigtigt altid at kontrollere din cykelholders maksimale belastningsvægt og ikke overskride denne grænse.


Specifikationer for Easy Rider kan findes i kapitlet '**Tekniske specifikationer**'.

Fjernelse (og transport) af Easy Rider-sædet

Stil cyklen på linje med cykelholderen, mens den er installeret på køretøjet, til forberedelse. Dette er for at muliggøre en jævn overgang til holderen.

Følg derefter disse trin:

1. Aktiver parkeringsbremsen, fjern eventuelle genstande fra kurven og fjern eventuelle andre løse genstande, der kan falde af cyklen.
2. Hvis du har en Easy Rider med el-assistance, skal du først fjerne ladekablet. Dette er kablet, der fører fra batteriet til det eksterne ladepunkt i sædet.
3. For at afmontere sædet skal du fjerne skruen under sædet med en unbrakonøgle (størrelse 4). **Bemærk!** Opbevar denne skrue på et sikkert sted, da du skal bruge skruen, når du sætter sædet tilbage på cyklen.
4. Åbn hurtigspændingsstiften på siden af sædet og træk hele sædeenheten baglæns for at fjerne sædet fra cyklen.
5. Du kan nu opbevare sædet og batteriet i køretøjet, og du kan placere cyklen på cykelvognen.

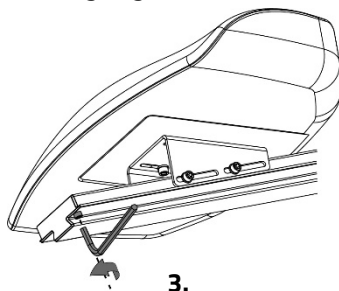


Det er ikke muligt direkte at købe en cykelholder til din vanRaam-cykel hos vanRaam. Der er adskillige producenter, der er specialiserede i at lave specialfremstillede cykelholdere, tagstativholdere eller opbevaringsløsninger til din cykel. Se vanRaams website for yderligere information.

Fjernelse (og transport) af Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small-sædet


For Easy Rider Compact (Small) skal du gøre følgende:

1. Sæt cyklen på parkeringsbremsen; fjern om nødvendigt tasken fra bærerammen og eventuelle andre dele, der kan falde af cyklen.
2. Hvis ryglænet har mulighed for eksternt ladepunkt, skal du først fjerne ladekablet fra batteriet.
3. For at fjerne sædet fra cyklen skal du først skrue endefastgøreren [A] af sædeskyderen. Gør dette ved at skrue de to skruer [B] af med en Torx-skruetrækker.
4. Du kan nu fjerne sædet [C] fra cyklen.

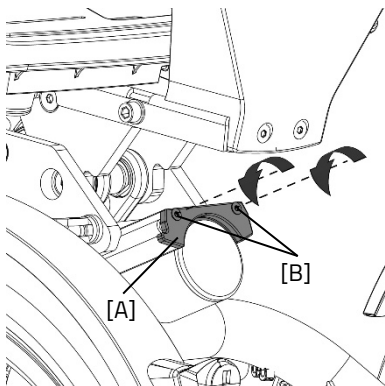

Forsigtig! Efter montering af sædet tilbage på cyklen skal du altid sørge for, at endefastgøreren [A] er genmonteret. Denne del sikrer, at sædet ikke er monteret for langt tilbage, hvilket ville skabe store sikkerhedsrisici.

Har du ekstra tilvalg på din cykel? Nogle af disse tilvalg forklares nedenfor. Yderligere tilvalg er tilgængelige via en vanRaam-forhandler.

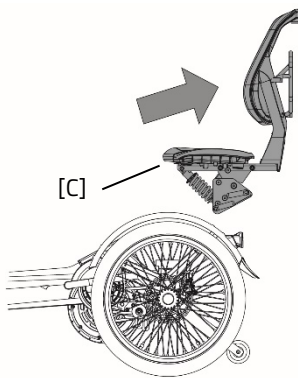

Har du ekstra tilvalg på din cykel? Nogle af disse tilvalg forklares nedenfor. Yderligere tilvalg er tilgængelige til køb via en vanRaam-forhandler.

Easy Rider delbart stel


Følg disse trin for at dele stellet:

1. Sluk el-assistancen.
2. Åbn velcro-stropperne [A] på kablerne.
3. Tag stikket [B] til lygterne ud.
4. Fjern håndtaget [C] fra styret. Tryk på fjederens kugler for at trække styret udad. Sæt dette håndtag på bagagebæreren og fastgør med bændlerne.
5. Drej stjerneknappen [D], indtil den ikke kan drejes længere. **Bemærk!** Tryk endnu ikke stjerneknappen ned.
6. Støt forenden af cyklen ved at holde i styrerøret [E] og træk forenden let opad.
7. Tryk med den anden hånd på stjerneknappen [D] for at frakoble forbindelsen.

Bemærk! Tryk ikke på stjerneknappen uden at støtte forenden af cyklen.

8. Du kan nu langsomt sænke forenden [E] af cyklen. **Tip:** Sæt ikke cyklen på parkeringsbremsen, så forenden nemt ruller fremad.



Tip: Læg forenden af cyklen på et blødt underlag for at forhindre skade.

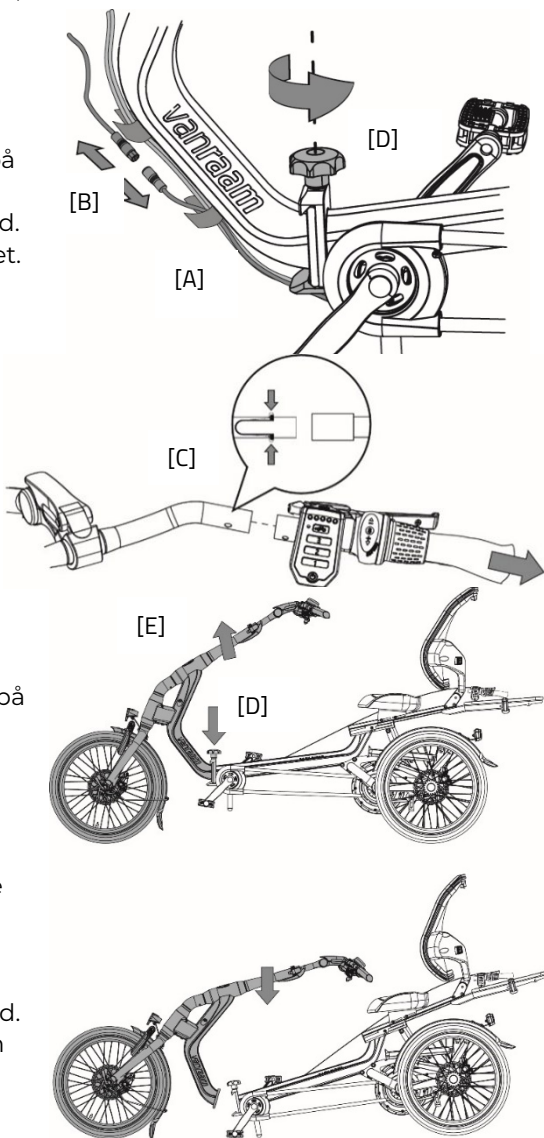

For at sætte de to dele af cyklen sammen igen følg disse trin:

Tip: sæt ikke cyklen på parkeringsbremsen, dette gør den lettere.

1. Sørg for, at stjerneknappen [D] er fuldstændig løsnet.
2. Spænd forenden af cyklen ind i stalleforbindelsen [F].
3. Løft forenden [E] af cyklen for at forbinde cyklen (løftestangseffekt).
4. Stram forbindelsen ved at dreje stjerneknappen. Løft let forenden af cyklen for at sikre, at forbindelsen er plan. **Bemærk! Sørg for, at forbindelsen er plan, og at knappen er fuldstændig strammet, inden du bruger cyklen.**
5. Du kan nu sætte håndtaget tilbage på styret.
6. Sæt lygternes stik i. Sørg for, at de to hvide linjer [G] er justeret med hinanden.
7. Endelig kan du nu fastgøre kablerne ved hjælp af velcro-stropperne [A].

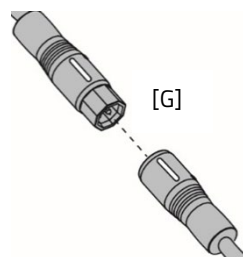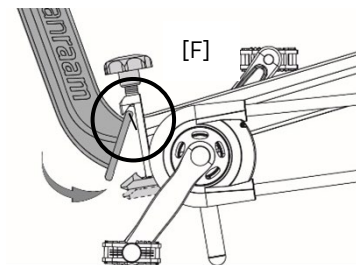


Krankkortener

(Easy Rider, Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)


Krankkorteneren er fastgjort til kranken (som vist). Pedalen kan derefter monteres i to positioner i krankkorteneren.

Med justeringsskruen [A] skal krankkorteneren justeres med kranken.

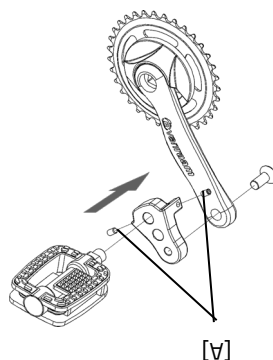


Stokkeholder Easy Rider

Du kan tage to stokkeholdere med i stokkeholderen. Sæt stokken i holderen i bunden [A] og tryk derefter stokken ind i klipsene [B]. Fastgør stokken/-e ved at hægte bolden [C] på elastikens ende ind i klemmen.

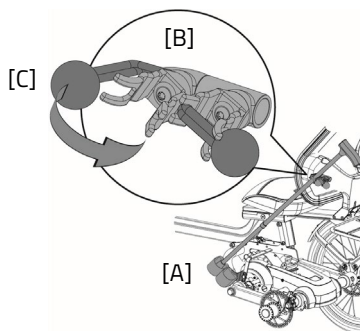

Stokkeholder Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small

Du kan tage to stokke med i stokkeholderen. Sæt stokken i holderen i bunden [A] og tryk derefter stokken ind i klipsene [B]. Fastgør stokken/-e ved at hægte bolden [C] på elastikens ende ind i klemmen.

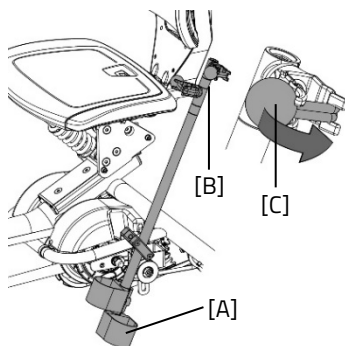

Fodfiksering

(Easy Rider, Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)



Med fodfikseringen kan du fastgøre foden ved at skubbe de to takkede stropper [A] ind i hurtigudløserne [B].

Hurtigudløseren kan låses op ved at trække kanten helt tilbage. Den takkede stroppe kan derefter trækkes ud.

De takkede stropper kan skæres til størrelse. Stroppen skal have en overskydende længde på mindst fem centimeter.


Fodfikseringens position på pedalen er justerbar i længden. Dette giver dig mulighed for at træde med fodsålen for at anvende optimal kraft.

1. Løsn de fire møtrikker et par omgange med en topnøgle.
2. Flyt pladen inkl. fodstøtten fremad eller baglæns til den ønskede position. Stram derefter møtrikker igen.

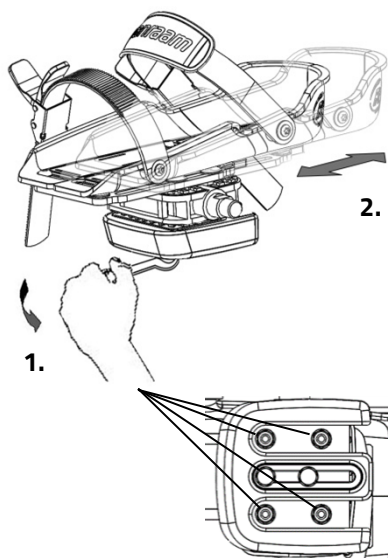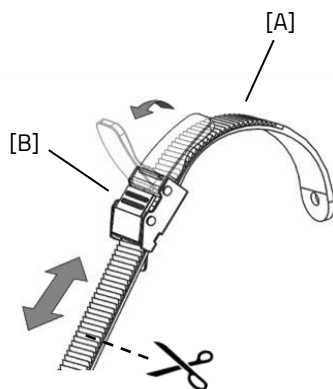


Fodfikseringen vender tilbage til sin neutrale position, når det ikke er i brug. Den neutrale position kan bestemmes ved at skubbe balanceblokken.

1. Løsn de to møtrikker et par omgange med en topnøgle.
2. Skyd balanceblokken til den ønskede position. Stram derefter møtrikkerne igen.

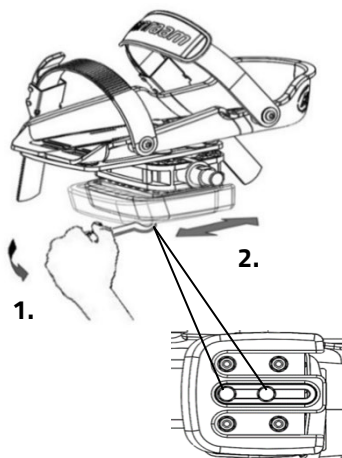

Fodfikseringen er også justerbar i bredden. Kun den ydre fodstøtte kan flyttes.

1. Løsn de to bolte et par omgange med en unbrakonøgle.
2. Flyt fodstøtten halvt til den ønskede position. Stram derefter møtrikkerne igen.

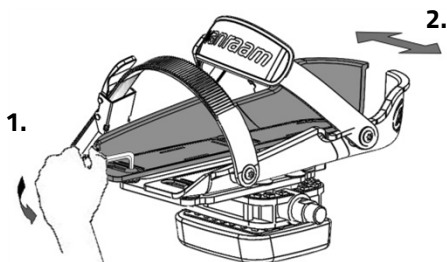

Med pedalforlængeren kan fodfikseringshalvdelen skubbes længere fra hinanden.

Tip: Bring de bageste dele sammen i en V-form ved justering af fodstøtten. Dette vil give dig en bedre pasform, da en fod er smalere bagtil end fortil.




Den lille fodstøtte (Fix20) er egnet til størrelse 22 til størrelse 36. Bredden af denne fodstøttes rækkevidde er min. 6,5 cm til maks. 9 cm. Den store fodstøtte (Fix25) er egnet fra størrelse 37 til størrelse 48. Bredden af denne fodstøttes rækkevidde er min. 8,5 cm til maks. 13 cm.

Underbens fiksering

(Easy Rider, Easy Rider Compact Easy Rider Compact Small)

Med muligheden for underbensfæste kan du fastgøre underben. For at justere underbensstrappen:


1. Løsn bolten [A] et par omgange med en nøgle. Juster højden af underbensfikseeringen, så det passer til rytterens underben. Stram derefter bolten igen.
2. Løsn de to møtrikker [B] et par omgange. Vinklen på benkoppen kan nu justeres. Drej benkålen til den korrekte position og stram derefter møtrikkerne igen.
3. Brug velcro til at fastgøre underben.

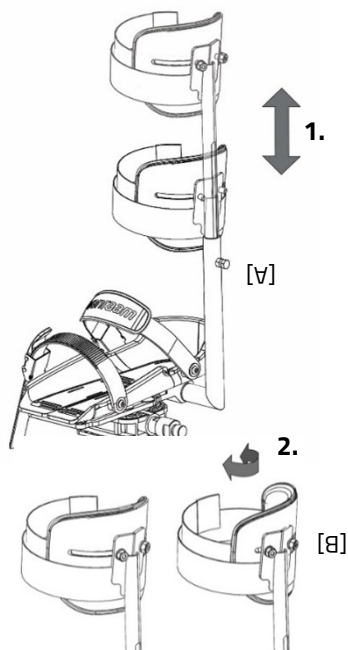

Rollatorholder

(Easy Rider)

Rollatorholderens adapter kan justeres i højden. For at justere skal bolten [A] løsnes et par omgange med en unbrakonøgle. Nu kan adapteren justeres til den ønskede højde. Stram derefter bolten [A] igen.

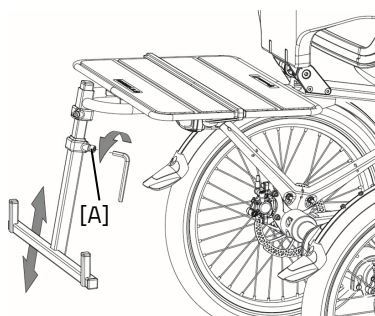

Vær opmærksom på den maksimale bagagevægt. De 20 kilo på holderen inkluderer en rollator. Overskrid ikke denne vægt, og vær opmærksom på, at dette tilvalg påvirker vælteadfærden.


Armlæn

(Easy Rider, Easy Rider Compact)

Armlænene er individuelt foldbare og kan også justeres til forskellige højder for Easy Rider.




Armlænet må ikke belastes med mere end 20 kg.

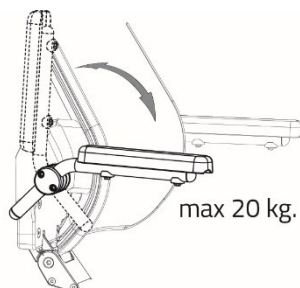

Sådan justerer du armlænene til den korrekte højde (kun Easy Rider):


1. Skru de to sekskantbolte [A] et par omgange af med en unbrakonøgle.
2. Armlænet kan nu justeres til den ønskede højde. Stram derefter boltene igen.

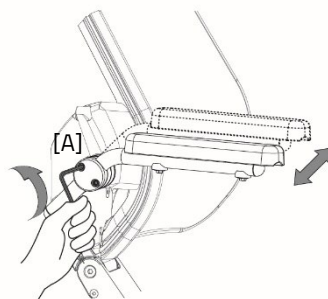

Svævende pedal

(Easy Rider, Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)

Den svævende pedal kan indstilles til forskellige positioner. For at gøre dette skal sekskantbolten [A] først løsnes et par omgange med en unbrakonøgle. Den svævende pedal kan derefter justeres til den ønskede højde. Stram derefter boltene igen.

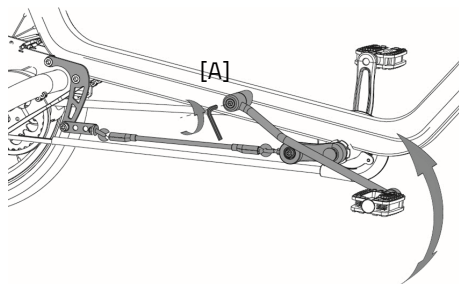

Billedet afviger fra Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small.




Når du ruller baglæns og stiger af cyklen, kan den svævende pedal sparke tilbage. Vær opmærksom på, at pedalen i denne situation kan komme i kontakt med benet.


Gearstang

(Easy Rider, Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)

Geargrebets position kan bestemmes ud fra skifterens position og brugerens præferencer. For at justere grebet skal bolten [A] løsnes et par omgange med en unbrakonøgle. Nu kan grebet justeres til den ønskede position. Stram derefter bolten, så grebet klemmer tilstrækkeligt om skifteren. **Bemærk!** Stram ikke bolten mere end nødvendigt.

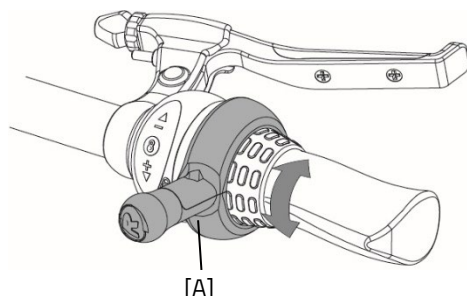

Cykelanhængeradapter Easy Rider

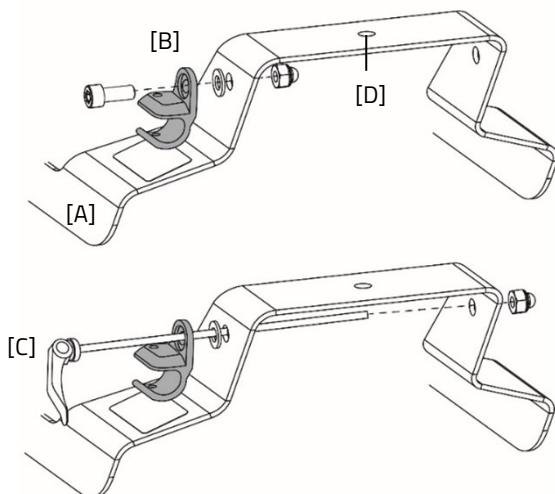

Cykelanhængeradapterbeslaget [A] er fastgjort til svingarmen bagtil på cyklen. På dette beslag kan din cykelanhængers adapter [B] monteres. Beslagets bredde svarer til en nabeadapter på en almindelig 2-hjulet cykel.



Adapteren [B] er ikke inkluderet med dette tilvalg. Adapteren kan afvige fra den på billederne.

Din cykelanhængers adapter [B] kan fastgøres til beslaget ved hjælp af de dele, der følger med beslaget. Hvis du har en hurtigudløsningsmekanisme [C], kan denne også bruges med beslaget. Hvis din cykelanhænger har en kugleledforbindelse, kan den monteres på punkt [D].



Sørg for grundigt at læse brugsanvisningen til din cykelanhænger, og at den overholder producentens anvisninger inden brug.




Maks. samlet belastningskapacitet på 45 kg.

Sikkerhedsflag

(Easy Rider, Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)

For at fjerne sikkerhedsflaget følg disse trin:

1. Løsn kapselsmøtrikken [A] et par omgange med en topnøgle.
2. Løsn unbrako-bolten [B] på ryglænet.
4. Sikkerhedsflaget kan nu fjernes.
5. Stram endelig kapselsmøtrikken [A] igen.

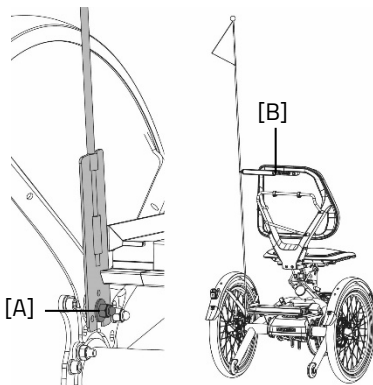

	Easy Rider Medium	Easy Rider Large	Easy Rider Compact	Easy Rider Compact Small
Indvendig benlængde (cm)	65-88	85-108	63-81	52 – 71,5
Længde (cm)¹	225	242	173	173
Bredde (cm)	78	78	73	73
Højde (cm)	116	116	109	100
Opstigningshøjde (cm)	35	35	32	32
Forhjul	20"	20"	16"	16"
Baghjul	20"	20"	20"	20"
Weight (kg) configuration without electrics	49 (med sæde)	51 (med sæde)	39 (med sæde)	32
Maks. brugervægt (kg)²	140	140	100	80
Maks. belastning bagageplade eller bæreramme (kg)	20	20	10	10
Bremser, for	Mekaniske skivebremser med parkeringsbremsefunktion	Mekaniske skivebremser med parkeringsbremsefunktion	Mekanisk fælgbremse med parkeringsbremsefunktion	Mekanisk fælgbremse med parkeringsbremsefunktion
Bremser, bag	Hydrauliske skivebremser eller fodbremser	Hydrauliske skivebremser eller fodbremser	Hydrauliske skivebremser	Hydrauliske skivebremser
Affjedring (lbs/tomme)³	550 / 750* / 1000	550 / 750* / 1000	550	n/a

Tekniske specifikationer

¹Længde (cm) for standardversionen. På grund af mulige justeringer af cyklen kan længden variere.

² Dette gælder for standardstellet. Easy Riders stel kan forstærkes og femstiles efter mål. Dette kan ikke gøres med Easy Rider Compact og Easy Rider Compact Small.

³Affjedringen med* er monteret som standard. Yderligere information om bestemmelser af den korrekte affjedring til Easy Rider og udskiftning af affjedringen kan findes i kapitlet **'Reperation og vedligeholdelse af forhandler'**.

Rengøring og vedligeholdelse af ejeren

Nedenfor er anvisninger til vedligeholdelse og justeringer, som du selv kan udføre regelmæssigt. Dette holder cyklen i optimal stand.

Rengøring og desinfektion

Den trehjulede cykels stel kan rengøres med en fugtig klud. Du kan bruge et mildt rengøringsmiddel til snavsede pletter.

Hjulene kan rengøres med en fugtig børste med plasticbørster (ingen stålbørste!). Sadlen, grebene og ryglænet kan desinficeres med mild sæbe og vand.



Brug ikke en højtryks- eller dampvasker!

Det rigtige smøremiddel

Kæden bør rengøres og preserves regelmæssigt (ca. hvert tredje måned). Brug kun speciel kædefedt eller Teflon-spray. Dette er den eneste måde at sikre, at kæden kører jævnt, forbliver vandafvisende og ikke ruste.

1. Tør kæden af med en klud.
2. Behandl kæden med fedt eller spray.
3. Tør overskydende smørelse af med klud.

Andre dele skal **ikke** behandles med et smøremiddel.

Kontrol af dæktryk

Det korrekte dæktryk er vigtigt for sikker og komfortabel cykling. Dette er angivet på siden af dækket, i bar eller psi.

Forsigtig! Pump aldrig til et højere tryk end det maksimum, der er angivet dér.

Tip: Brug en cykelpumpe med manometer for korrekt at kontrollere trykket.



Inspektion af den trehjulede cykel

Det er nødvendigt, at den trehjulede cykel inspiceres mindst én gang om året af en forhandler for at kunne fortsætte med at gøre krav på garantien. Brug "Service-, vedligeholdelses- og ændringsformularen" på bagsiden af denne manual. Den første service bør udføres efter de første 200 kilometer eller efter to måneder.

I tilfælde af fejl eller defekter skal forhandleren kontaktes **øjeblikkeligt** for reparationer.

Udskiftning af sikkerhedsrelaterede komponenter (især stel, bremses, belysning, styr, forgaffel og drev) skal udføres af din forhandler.

Hvis du selv vil udskifte komponenter, er du ansvarlig for skader som følge af forkert monterede komponenter.

Brug kun **originale** vanRaam-reservedele; du kan købe disse fra din forhandler. På anmodning vil forhandleren give de nødvendige oplysninger til reparation og vedligeholdelse.

Reparation og vedligeholdelse af forhandler

Under servicen skal du kontrollere bremsene, fælgene, lygterne, kædens spænding og eger. Kontroller også dækkenes slidmønster. Dette skal være mindst én millimeter. Slidte dæk eller eventuelle defekte dele skal udskiftes. Kontroller parkeringsbremsens funktion. Med den faste parkeringsbremse aktiveret må den trehjulede cykel med rytter på ikke køre væk.

Kontrol af fælgen

På grund af samspillet mellem både bremsen og fælgene er ikke kun bremsebelægningen, men også fælgens tilstand vigtig. Af denne grund bør fælgen kontrolleres med regelmæssige mellemrum, f.eks. ved oppumpning af dækket. Tilstedeværelsen af fine revner i fælgflangen ved egnipplerne eller deformation af fælgen med øget lufttryk i dækket indikerer større slitage. I så fald skal fælgen udskiftes, da dette ellers kan føre til en reduktion af bremsevirkningerne eller endda et brud i fælgen med alle de farlige konsekvenser, det medfører.

Reparationer, vedligeholdelse og ændringer må kun udføres med originale vanRaam-dele.

Spændemomenter

Del	Moment
Styrstambolt Easy Rider Compact Small	21-23 Nm
Styrbolte Easy Rider Compact Small	12-14 Nm
Silent smart display-monteringsbolt	1 Nm
Silent smart knapenheds bolt	0,4 Nm
Styrleje styr	Fri for slak
Styrleje forgaffel	Fri for slak
Svingarmmontagebolte	70 Nm
Motormøtrikker	50 N
Kranklejebolte	30 Nm
Krankbolte	37 Nm
Bremsekaliperbolte	10 Nm
Hjulbolte	30 Nm
Hjilmøtrikker	37 Nm
Bolt hurtigspændingsgreb sædejustering	10 Nm
Bryststift ryglæn	25 Nm


Indstilling af den justerbare styrstamme

(Easy Rider, Easy Rider Compact)

Hvis håndtaget på styrstammen ikke lukker korrekt, og styret ikke er tilstrækkeligt fastspændt af stammen, skal justeringsbolt genjusteres.

Følg følgende anvisninger for korrekt at justere styrstammen:

1. Åbn styrstammens klemme [A].
2. Nu kan justeringsskruen indstilles.
3. For at øge klemmekraften: Stram justeringsbolten med uret.
4. For at reducere klemmekraften: Løsn justeringsbolt mod uret.
5. Luk nu styrstammens klemme [A].

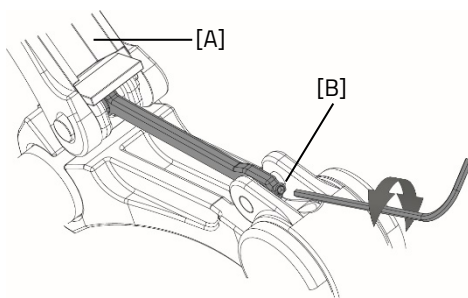

Bjælken skal lukkes med en modstand på 120-150 N. Ellers kan styret løsne sig under kørslen, hvilket kan medføre alvorlige kvæstelser.

Den korrekte kædes spænding



Kæden bør ikke være for stram. Den skal kunne bevæges. Kæden skal kunne flyttes op og ned med ca. en halv centimeter uden besvær.

Justering af kædens spænding

(Easy Rider, Easy Rider Compact, Easy Rider Compact Small)

For at indstille kæderne til den korrekte spænding er det vigtigt, at den korrekte rækkefølge følges. Følg anvisningerne nedenfor for at justere navet og spændehjulet, så kæderne har den korrekte spænding:

1. Løsn møtrikkerne [A] på begge sider af navet.
2. Stram nu møtrikkerne [B] for at øge kædens [C] spænding. Justering af denne kædes spænding vil påvirke den anden kæde [D].
3. Når kæden har den korrekte spænding, stram møtrikkerne [A].
4. Juster spændingen på den næste kæde [D]. Løsn bolten [E] et par omgange med en unbrakonøgle. På den anden side forhindres møtrikken i at dreje med en nøgle.
5. Flyt spændehjulet, så kæden har den korrekte spænding som beskrevet ovenfor.
6. Stram derefter bolten og møtrikkerne igen.
7. For at justere motorens kædes [F] spænding, gentag

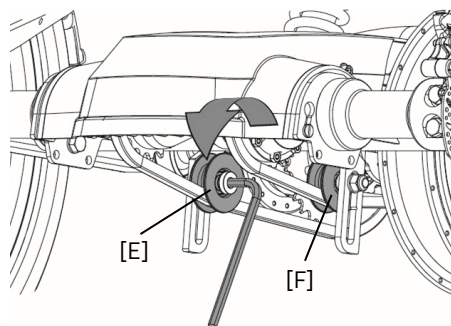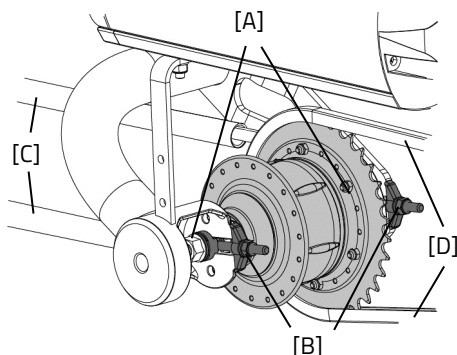

handlingerne fra trin 2 til 4
for denne kæde.

Udskiftning af Easy Riders støddæmper


Easy Rider har et affjedringstel (valgfrit valg af affjedring egnet til kropsvægten). Det anbefales at hænge cyklen op i en løfteindretning for at udskifte affjedringen. Sørg for, at svingarmen kan hænge frit fra baggaflen.

Sådan udskiftes affjedringen:

1. Løsn sekskantboltene [A]. Hold en nøgle på møtrikken, ellers drejer møtrikken.
2. Støt svingarmen og løsn boltene.
Bemærk! Svingarmen vil falde ned, hvis den ikke er støttet. Sænk nu langsomt svingarmen.
3. Nu kan svingarmens sekskantbolt [B] løsnes.
4. Affjedringen kan nu udskiftes.
5. **Bemærk!** Affjedringen skal monteres i dæmperen fri for slak. For at gøre dette drejes spænderingen [C] i den retning, der er vist på billedet. Dette kan gøres ved at dreje affjedringen med hånden; spænderingen vil derefter rotere.
6. Stram boltene [A, B] igen.

For de bedste køreegenskaber anbefales det at vælge en affjedring, der passer til brugerens vægt.

Affjedringstype	Brugervægt:
550 lbs	< 80 kg
750 lbs	80 – 110 kg
1000 lbs	> 110 kg

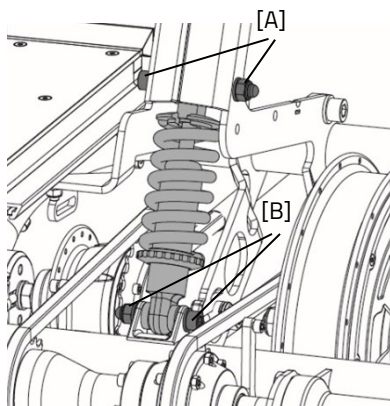


Sædeaffjedring Easy Rider Compact

Easy Rider Compact har et sæde med en affjedringsfjeder. Denne fjeder kan forspændes for at gøre affjedringen lidt stivere.

For at øge spændingen på affjedringen, følg disse trin:

1. Grib både spænderingen og affjedringen med begge hænder.
2. Drej spænderingen og affjedringen med uret.
(Rotationsretning som illustreret på billedet.)

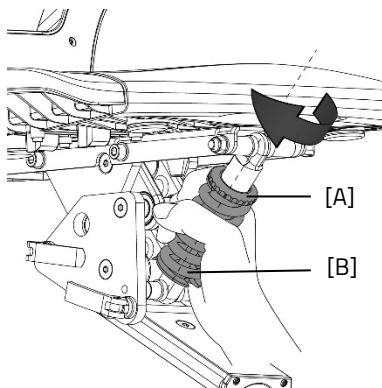

Returpunkt for bortskaffelse

Kontakt din forhandler, hvis du ønsker at returnere cyklen. Du kan også kontakte det lokale affaldsselskab. De vil genbruge cyklen i henhold til reglerne på dit opholdssted.

Genbrug af batteriet

Hvis dit batteri er defekt, eller hvis du ikke længere bruger det, skal det genbruges. Kontakt din forhandler. De er ansvarlige for at overholde genbrugspligten. Spørg dem om betingelserne, eller se reglerne vedrørende genbrug på dit opholdssted/i dit land.

Overdragelse / salg til en ny ejer

Hvis du overfører den trehjulede cykel til en ny ejer, er det vigtigt, at du overleverer al nødvendig teknisk dokumentation og reservenøgler, så den nye ejer kan bruge cyklen sikkert.

Bruger du vanRaam-appen, og har du knyttet din cykel til appen? Sørg for at frakoble cyklen og batteriet fra appen, når du overdrager/sælger.

Garanti

Garantien gælder for alle produktfejl, for hvilke det er bevist, at årsagen er en materiale- eller fremstillingsfejl.

Vi giver fem års garanti på stel og forgaffel. For alt tilbehør og andre dele (med undtagelse af slidele) anvender vi den lovpligtige garantiperiode på to år. Garantien gælder kun for normal brug og vedligeholdelse af cyklen, som beskrevet i denne brugermanual.

Bemærk!

Både garantien og produktansvaret generelt bortfalder, hvis anvisningerne i denne brugermanual ikke følges, hvis vedligeholdelsesarbejde er udført forkert, eller hvis der er foretaget tekniske ændringer eller tilføjelser til cyklen med ikke-originale vanRaam-dele uden tilladelse fra vanRaam. Den originale CE-erklæring på cyklen bortfalder også ved justeringer foretaget af tredjeparter. Manglende CE-erklæring kan medføre problemer ved forsikring af cyklen og i tilfælde af skader eller ansvar.



Stelnummer

Du finder stelnummeret på mærkaten. Denne mærkat er påsat stellet; se billederne.

Eksempel på mærkat:



Position for
mærkat Easy Rider, Easy Rider Compact og Easy
Rider Compact Small:

Easy Rider



På stellerøret

Easy Rider Compact



Bagtil på stellerøret

Easy Rider Compact Small



Bagtil på stellerøret

Vedligeholdelses anbefaling

En vanRaam-cykel er ofte udsat for intensiv brug og skal fungere i alle vejrforhold. Ved korrekt vedligeholdelse af cyklen kan levetiden forlænges betydeligt. Denne vedligeholdelse kan udføres af en vanRaam-forhandler. I de fleste tilfælde kan du selv udføre den månedlige og årlige inspektion.

Vedligeholdelsesovervisning:

Hvad	Enkeltpersonscykel	Flerpersonscykel	Varighed	Af hvem?
1 st serviceydelse	3 måneder/300 km	3 måneder/200 km	15 min	Forhandler
2 nd Serviceydelse	6 måneder/1.000 km	6 måneder/500 km	15-30 min	Forhandler
3 rd Serviceydelse	12 måneder/2.000 km	12 måneder/1.000 km	30-90 min	Forhandler
Månedlig inspektion*	Hver måned	Hver måned	15 min	Bruger
Årlig inspektion*	Hvert 12. måned	Hvert 12. måned	60 min	Bruger

* Dette anbefales for at forlænge din cykels levetid. Du kan også få dette gjort af din forhandler.

Månedlig inspektion

15 minutter

Herunder:

- Kontroller og pump dækkende
- Kontroller kædens spænding og smør om nødvendigt
- Stram bolte/møtrikker hvor nødvendigt
- Kontroller alle lys
- Kontroller bremserne
- Kontroller alle roterende dele og smør om nødvendigt

Årlig inspektion

60 minutter

Herunder:

- Kontroller og efterbehandl lakken
- Kontroller hjulene for skader på fælg, dæk, eger, nav og lejer
- Kontroller egerspænding og hjulets rethed
- Kontroller styrets kugleled
- Kontroller alle lys
- Kontroller saddeklemmen
- Kontroller placeringen af alle elektriske

• Rengør cyklen	komponenter (kun E-Cykler)
---	----------------------------

1st Serviceydelse

15-30 minutter

Herunder:

- Kontroller og pumpet dækkene op
- Kontroller egerspændingen
- Kontroller kædens spænding og smør
- Stram eventuelle bolte og møtrikker om nødvendigt
- Kontroller alle bremsekabler og bremsekalibre
- Kontroller gearene
- Kontroller og smør alle roterende dele
- Kontroller alle lys
- Rengør cyklen

2nd Serviceydelse

30-90 minutter

Herunder: Alle elementer fra serviceydelse 1, og:

- Kontrol af pedaler og krankleje
- Kontrol og smøring af låsen
- Demontering, samling og smøring af styrstammen
- Kontroller styrets kugleled
- Kør alle tests i forhandlerværktøjet (E-Cykel)

3rd Serviceydelse

60-120 minutter

Herunder: Alle elementer fra serviceydelse 1, 2, og:

- Inspektion af lakken
- Inspektion af stel/forgaffel
- Inspektion af sædehynder
- Kontroller funktionen og lyden fra motor/gearnav.
- Kontroller reflektorer for eventuelle skader
- Kontroller placeringen af alle elektriske komponenter (E-Cykel)
- Kør alle tests i forhandlerværktøjet (E-Cykel)

Serviceplan

1st Serviceydelse

- Ja/Nej
- Forhandler:
- Mekaniker:

Dato:

Bemærkninger:

.....

.....

.....

.....

2nd Serviceydelse

- Ja/Nej
- Forhandler:
- Mekaniker:

Dato:

Bemærkninger:

.....

.....

.....

.....

3rd Serviceydelse

- Ja/Nej
- Forhandler:

Dato:



- Mekaniker:

Bemærkninger:

.....

.....

.....

.....

Årlig inspektion

Dato	Forhandler	Mekaniker	Bemærkninger

Noter:

.....

.....

.....

.....

.....

.....



This image shows a blank sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

Noter:

[illegible]

Noter:



Leverings- og serviceformular

Tillykke med din vanRaam-cykel. Denne cykel er produceret med den største omhu. For at garantere høj kvalitet i videst muligt omfang producerer vanRaam cyklerne i henhold til ISO 9001: 2015 kvalitetskravene. vanRaam er certificeret herfor af DNV GL Business Assurance B.V.

Du kan optimalt nyde denne vanRaam-cykel, der er specialfremstillet til dig, hvis cyklen er justeret til dine krav, og anvisningerne i brugermanualen følges. Sørg for at overholde serviceintervallerne foreskrevet i driftsvejledningen.

For at kunne gøre krav på service og garanti skal du altid udfylde formularerne ved levering og serviceintervaller. Med denne formular underskriver forhandleren og slutbrugeren også, at slutbrugeren er blevet instrueret om cykelens betjening, at cyklen er justeret til slutbrugers ønsker, og at slutbrugeren har modtaget den originale vanRaam-manual.

Udfyldes ved levering af cyklen

vanRaam cykeltype:	
Stelnummer:	
Nøglenummer:	
Leveret til:	
Af forhandler:	
Sted:	



Dato:	
Underskrift cykelbruger:	Underskrift forhandler:
Forhandlerstempel (hvis tilgængeligt):	