



Vejledning til montering og afmontering af baldakinen



Van Raam
Guldenweg 23
7051 HT Varsseveld, Holland

☎ +31 (0)315 – 25 73 70

✉ info@vanraam.com

🌐 www.vanraam.com

Indholdsfortegnelse

Indhold	2
Producentens kontaktoplysninger	3
Overensstemmelse	3
Montering og fastgørelse af baldakinen på bænken	4
Samling af baldakinen.....	6
Adskillelse af baldakinen.....	7

Indhold

Denne brugermanual indeholder vigtig og nødvendig information om brugen af baldakinen på rickshaw-cyklen Chat. Vi anmoder dig om at læse denne manual grundigt, inden du bruger cyklen. Følg altid alle anvisningerne i denne manual.

Følgende handlinger gennemgås i denne manual:

- Montering og fastgørelse af baldakinen på bænken
- Samling af baldakinen
- Adskillelse af baldakinen



**LÆS
OMHYGGELIGT**

Producentens kontaktoplysninger

vanRaam

Guldenweg 23

7051 HT Varsseveld, Holland

☎ +31 (0)315 – 25 73 70

✉ info@vanraam.com

🌐 www.vanraam.com


Overensstemmelse

vanRaam erklærer som producent, at tandemcyklerne, som beskrevet i denne manual, er fremstillet i overensstemmelse med retningslinjerne 93/42/EØF, risikokategori 1. Alle produkter er fremstillet i overensstemmelse med retningslinjerne 2006/42/EF. Overensstemmelseserklæringen kan findes på vanRaams website.

Montering og fastgørelse af baldakinen på bænken


Trin 1:

Sæt de bøjede rør i indsatserne på bænken.

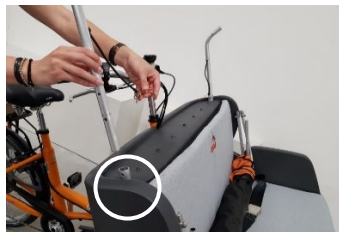

Trin 2:

Sæt sikringspinnen i det nederste hul for at fastgøre røret (baldakinens højeste position).
Til baldakinens laveste position bruges det øverste hul, og røret fastgøres med sikringspinnen.

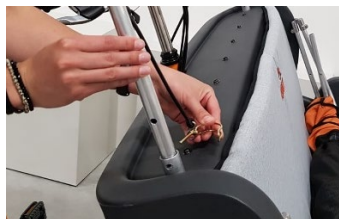

Trin 3:

Luk sikringspinnens bøjle.

Forsigtig! med dine fingre, da bøjlen lukker med kraft.



Trin 4:

Placer rammen i de bøjede rør, der er sat i bænken.




Trin 5:

Fold baldakinen på midten langs kanten mellem folievinduet og netvinduet.



Trin 6:

Hold baldakinen med folievinduet vendt mod dig selv.
Fastgør baldakinen til konstruktionen med tryklåsene

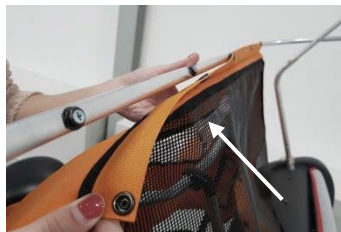

Trin 7:

Løft rammen og træk baldakinen over den.



Trin 8:

Fastgør baldakinens forside med tryklåsene.




Trin 9:

Luk begge lynlåse på bagsiden af baldakinen.



Trin 10:

Fastgør tryklåsene fra baldakinen til bænken.

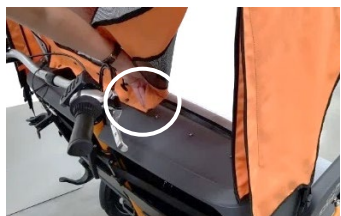

Samling af baldakinen

Trin 1:

Fjern elastiksnoren fra krogene.

Trin 2:

Åbn spænderne og hæng ringene rundt om de runde knopper.



Trin 3:

Du bør først spænde de bageste stropper på baldakinen for at sikre korrekt pasform. Inden stroppen spændes, skal spændet åbnes. Luk spændet, når stroppen er strammet.



Trin 4:

Gentag denne proces for de resterende to sidestropper.

Trin 5:

Fastgør elastiksnoren til krogene igen.



Trin 6:


Baldakinen er korrekt samlet, hvis den ligner billedet til højre.



Adskillelse af baldakinen

Trin 1:

Åbn spændet, løs spændingen på alle fire stropper, og hæng ringene af.

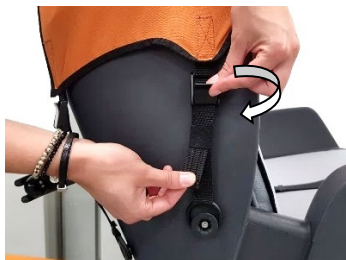


Trin 2:

Åbn lynlåse på begge sider af baldakinen.



Trin 3:

Løs tryklåse fra baldakinen og bænken.

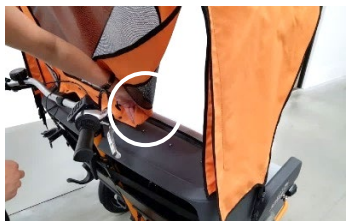

Trin 4:

Fold begge sider af baldakinen op på taget.



Trin 5:

Skub for- og bagenden af rammen mod hinanden.



Trin 6:

Fold bagsiden af baldakinen tæt rundt om den foldede ramme. Fold bagpanelet under og derefter over toppen. Sørg for, at bagpanelet foldes i den korrekte retning.



Trin 7:

Træk elastiksnorene over den stramt rullede baldakine. Fastgør enden af snorene i løkken.



Trin 8:

Sørg for, at elastiksnoren er fastgjort korrekt.

Forsigtig! med elastiksnoren, der kan smække løs, hvis den ikke er korrekt fastgjort.



Trin 9:

Den rullede baldakine og ramme kan løftes **fra de bøjede rør**.



Trin 10:

Placer baldakinen på de to nederste kroge, der findes på bagsiden af bænken.




Trin 11:

Placer rammen i krogene og fastgør den med elastiksnorene.



Trin 12:

Fjern sikringspinnen ved at åbne bøjlen og trække pinnen ud af hullet. Sørg for at holde det bøjede rør for at forhindre røret i at glide ned.

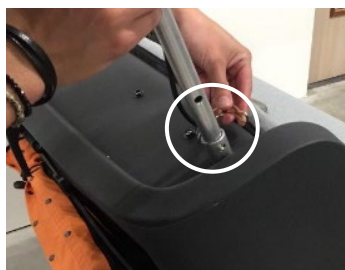

Forsigtig! med dine fingre. Bøjlen kan lukke med kraft.

Trin 13:

De bøjede rør kan opbevares bagerst på bænken.

